

Les troubles de la continence



Visionnez les **vidéos d'application**
en scannant les QR codes dans la brochure

Mathieu BOSREDON

N°1 mondial de Handbike
et utilisateur des sondes Speedicath



Le développement durable, un sujet au cœur des préoccupations de Coloplast

Parmi les valeurs de Coloplast, le respect de l'environnement prend toute sa place.

Les matériaux et le développement des produits

Coloplast choisit des matériaux respectueux pour l'environnement pour fabriquer ses produits.

Nos produits et leurs emballages en carton ont été conçus dans une optique de développement durable.

Comme vous pourrez le constater, toutes les boîtes de nos produits peuvent être recyclées. Afin de limiter le volume des déchets, nous utilisons des boîtes de taille réduite au maximum.



Les méthodes de fabrication


La politique du groupe Coloplast est de s'investir dans le respect de l'environnement. C'est

pourquoi, tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001.

Cette certification permet de montrer que les méthodes de fabrication respectent un certain nombre de critères afin de préserver l'environnement¹.

La production

Le PVC est un composant thermoplastique qui contient très souvent des phtalates (groupe de produits chimiques utilisés comme plastifiant et dont la toxicité est bien connue). On reproche aux phtalates leur pouvoir cancérigène et leur non-recyclage². Conscient des risques pour les utilisateurs et l'environnement, Coloplast a choisi de privilégier des produits sans PVC ni phtalates. C'est notamment le cas des sondes SpeediCath fabriquées en polyuréthane et de l'étui pénien Conveen[®] Optima composé de polysiloxane.

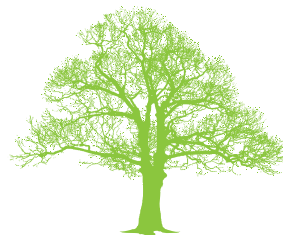

Le recyclage

Les boîtes et conditionnements de transport de nos produits sont en carton à base de fibres vierges et peuvent prétendre à un recyclage.

Les coques individuelles des étuis Conveen[®] Optima peuvent être recyclées au même titre que les bouchons de bouteilles en plastique. En 2021, 58 % des déchets de production ont été recyclés.

Notre ambition pour 2025³

90% d'emballages recyclables

80% d'emballages fabriqués à partir de matériaux renouvelables

Net Zéro carbone des émissions de portée 1&2^{4,5}

100% d'énergie renouvelable

Sommaire

Sondage intermittent

p. 4 à 25

La gamme SpeediCath :

- pour hommes
- pour femmes

La gamme EasiCath

Sondage à demeure

p. 26 à 29

Sondes à demeure Folsyl et Folatex
Poches stériles Conveen[®] Triform

Etuis péniens

p. 30 à 37

Conveen[®] Optima

Poches à urine

p. 38 à 40

pour le sondage intermittent,
le sondage à demeure et les étuis péniens

Les poches de jambe Conveen[®] et Conveen[®] Active
Les poches de nuit Conveen
Les solutions de maintien des poches sur la jambe
Les solutions de stabilisation de la poche

Accessoires

p. 41

Gamme Peristeen[®] Plus Irrigation transanale

p. 42 à 47

Pour un transit intestinal maîtrisé

Peristeen Plus sonde à ballonnet
Peristeen Plus sonde rectale conique

1. Site de l'organisation internationale de normalisation www.iso.org

2. INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), fiche sur les phtalates disponible à l'adresse web : http://www.inrs.fr/hm/les_phtalates.html

3. Rapport interne Coloplast "Sustainability Report 2020-2021"

4. En tonnes de CO₂

5. Objectif soumis à Science-Based Targets initiative (SBTi) pour validation

La gamme SpeediCath®

Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi

N°1
en France*



SpeediCath®

SpeediCath, une gamme conçue pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur

Depuis près de 15 ans, les Laboratoires Coloplast, grâce à la gamme SpeediCath®, ont été les premiers à vous proposer des sondes hydrophiles prêtes à l'emploi, des sondes compactes et des sets de sondage compacts.

La gamme SpeediCath est la plus documentée en matière de performances^{1-6;8-10;12-15} des sondes.

Nous n'avons pas inventé la sonde, mais nous la réinventons chaque jour.



Les premières sondes prêtes à l'emploi
SpeediCath Standard

Les premières sondes compactes
SpeediCath Compact et SpeediCath Compact Eve

Les premiers sets de sondage compacts
SpeediCath Compact Set

Les premières sondes souples avec une gaine sèche en circuit clos
SpeediCath Flex

Un set de sondage doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs
SpeediCath Flex Set



* Prix du design remportés :
SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design "Medical design excellence awards 2011" et "Janus de la santé 2010"
SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design "Independent living - design awards"
SpeediCath Compact Eve gagnant du prix du design "Reddot Design Award - Best of the Best 2015" et Prix "Design Award IF 2015"
SpeediCath Compact Set gagnant du prix du design "Reddot design awards 2013"

Ce n'est pas par hasard si la gamme SpeediCath est la plus utilisée en France*

1. Sécurité et confort urétral

Les premières sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi

- **Facilité de manipulation** ^{5,10,12,13} pour le patient
- **Lubrifiant prêt à l'emploi** : diminution du risque de contamination exogène lié à la qualité de l'eau

Sonde en polyuréthane :
100% sans PVC - Pas de phtalates
CMR dans la composition

Les phtalates CMR sont des substances connues pour leurs effets : cancérogènes, mutagènes, repro-toxiques.

La qualité de lubrification d'une sonde joue un rôle important dans la protection de l'urètre ^{1,3}.



Unique à la gamme SpeediCath®**, la technologie de lubrification "Triple Action" protège l'urètre de trois façons :


1. **Le lubrifiant reste solide au corps de la sonde** ^{1,2} pendant l'insertion et le retrait de la sonde
2. **Le lubrifiant reste uniforme** sur toute la longueur de la sonde ^{1,3} pour une friction minimale
3. **Le lubrifiant reste hydraté** grâce à la solution aqueuse dans lequel il baigne

Des oeils polis, pour plus de confort lors du sondage ⁷

Un processus développé spécifiquement pour SpeediCath permet de polir les bords de chaque oeil "à chaud". Ceci crée une transition parfaitement douce entre l'oeil et la surface de la sonde et limite ainsi les risques de lésion de la muqueuse



Oeils non-polis

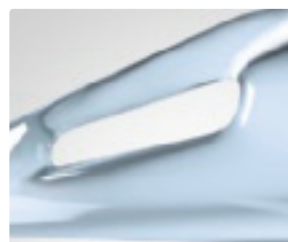

Oeils lubrifiés, polis à chaud

La gamme SpeediCath a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels de santé et des patients

2. Performances cliniquement prouvées

12 études randomisées ont démontré l'efficacité des sondes SpeediCath ^{2-6, 8-10,12-15}

Une efficacité sur de nombreux paramètres : facilité d'utilisation, inconfort urétral, infections urinaires, forces de friction, volume résiduel dans la vessie, discrétion, qualité de vie et préférence.

Une sonde à frictions minimales

Avec SpeediCath :

- **Les forces de friction sont réduites** ^{1,2}
- **La glisse est homogène sur toute la longueur de la sonde** ¹
- **La glisse est harmonieuse et reproductible d'une sonde à l'autre**
- **Réduit le risque de microtraumatisme urétral** ²
Étude clinique prospective, randomisée en cross-over comparant SpeediCath aux sondes Lofric sur 40 volontaires sains ² avec sensibilité urétrale préservée. Critère principal : Mesures des forces de frictions au retrait de la sonde. SpeediCath, 2 fois moins de friction qu'avec la sonde hydrophile comparateur ²

* Données GERS 2024 : la gamme SpeediCath, la gamme de sondes la plus vendue en France

** Le lubrifiant des sondes SpeediCath est breveté

3. Une gamme complète pour répondre à tous les besoins

> Respect des différences et des besoins

Sexe, mode de vie, dextérité, discrétion, auto ou hétéro-sondage...

> Gamme étendue

Sondes de longueur standard/compacte, sondes droites/béquillées, sondes pour limiter les oscillations, sondes pour adultes/enfants...

Pour les hommes

- a SpeediCath Flex
Les premières sondes souples avec une gaine sèche en circuit clos
- b SpeediCath Flex Set
Un set de sondage doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs
- c SpeediCath Compact Set
Le seul set de sondage télescopique, compact
- d SpeediCath Compact Homme
La seule sonde compacte télescopique pour homme
- e SpeediCath Control
La sonde standard avec un système de contrôle renforcé
- f SpeediCath Standard
La sonde standard



Pour les femmes

- g SpeediCath Compact Set
Le 1^{er} set de sondage compact
- h SpeediCath Compact Femme
La 1^{ère} sonde compacte pour femme
- i SpeediCath Compact Eve
La dernière génération de sonde compacte pour femme
- j SpeediCath Standard
La sonde standard

SpeediCath Compact, une solution adaptée au quotidien des utilisateurs

SpeediCath a su évoluer pour répondre toujours mieux aux besoins des professionnels de santé et des patients.

Gammes Speedicath Compact et Compact Set inscrites en nom de Marque**

Des bénéfices clés qui font la différence

Discrétion


Plus de 90% des patients trouvent la gamme SpeediCath Compact discrète^{4,5}
SpeediCath Compact facilite le stockage et le transport.

Hygiène

Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur :
Insertion sans toucher le corps de la sonde, respect de la technique «no-touch»⁷

Facilité d'utilisation^{4-6,10}

La majorité des utilisateurs notent les sondes SpeediCath Compact plus faciles à insérer que les sondes de longueur standard.

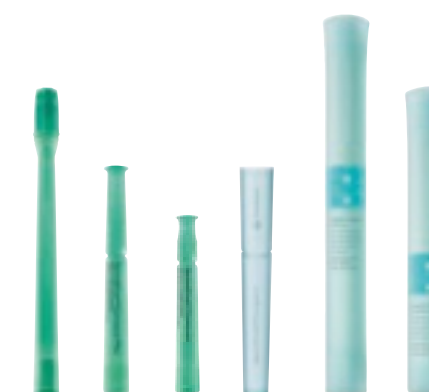

Une qualité de vie améliorée, en réduisant les contraintes de l'ASI¹⁰

10 ans après la commercialisation des 1^{ères} sondes compactes, une étude, publiée dans The Journal of Urology a démontré les bénéfices des sondes SpeediCath Compact sur la qualité de vie des patients.

Augmentation de 28% du score de qualité de vie ISC-Q* avec les sondes SpeediCath Compact par rapport aux sondes standards (p<0.001).

Reconnaissance par la Haute Autorité de Santé de l'Amélioration du Service Rendu (ASR niveau IV) en matière de qualité de vie par rapport aux sondes hydrophiles prises en charge dans les lignes génériques**.

+28%
d'amélioration
du score
de la QdV¹⁰
Etude publiée dans
The Journal of Urology

* ISC-Q = Intermittent Self Catheterization Questionnaire, score validé évaluant l'impact de l'ASI sur la QdV allant de 0 (contraintes lourdes de l'autosondage) à 100 (Aucune contrainte).

** Avis de la CNEDIMTS du 10/07/2021, sondes urinaires SpeediCath Compact. Avis de la CNEDIMTS 21 septembre 2021, set de sondage SpeediCath Compact Set



La gamme SpeediCath® pour homme

SpeediCath® Compact

SpeediCath® Compact Set

*Le seul set de sondage télescopique,
compact pour les hommes :*

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution tout-en-un discrète

Une simplicité prouvée^{16, 18}

SpeediCath Compact Set :

> Reconnu pour sa facilité d'utilisation^{16,18}

- 88% des patients¹⁶ et 100% des professionnels de santé¹⁸ le trouvent facile à utiliser
- 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set¹⁸

> Hygiène :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde avec respect de la technique "no-touch"⁷

SpeediCath Compact Set, une solution à proposer à tous vos patients, en utilisation unique ou en complément à l'utilisation des sondes.



Reconnu pour sa facilité d'utilisation¹⁶



reddot design award* winner 2013

Le "red dot" est un prix récompensant les produits au design de grande qualité. Le "red dot" est aujourd'hui un concours de design professionnel reconnu internationalement dans le domaine, il récompense les designs les plus innovants au monde.

Intégralement remboursé**

Boîte de 20 sets
Homme nelaton/droite
Longueur active : 30 cm / Longueur totale : 36 cm

CH	Référence	GTIN
012/18	284221	5708932533515



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact Set homme



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Gagnant 2013 du Prix du design "Reddot"

** Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 72,23 €TTC, remb. Séc. Soc. 72,23 €.

SpeediCath® Compact homme

La solution conçue pour les hommes :

- qui se sondent directement dans les toilettes ou qui souhaitent raccorder une poche
- qui souhaitent une solution discrète, même après utilisation

SpeediCath Compact Homme :

> Une solution très discrète pour faciliter le transport, le stockage et l'élimination :

- Grâce à son design compact (19 cm fermé, 30 cm une fois la sonde déployée) et non médical
- Facilite le transport, le stockage et l'élimination^{4,10}

> Simple d'utilisation :

- Plus facile à insérer et à contrôler qu'une sonde standard^{4,6}

> Hygiénique :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique "no-touch"^{4,6,7}

> Une vidange efficace⁸

> Connecteur universel

- pour poche à urine, si besoin.



Préférées aux sondes standards par plus de **6 patients sur 10**^{4,10}



Intégralement remboursé**

Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 30 cm / Longueur totale : 34 cm

CH	Référence	GTIN
○ 12/18	286920	5708932472623

Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact homme en fauteuil



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact homme



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design "Medical design excellence awards 2011" et du "Janus de la santé 2010"

** Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire: sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solide de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 80,87 € TTC, remb. Séc. Soc. 80,87 €.

SpeediCath® Flex

La solution conçue pour les hommes :

- qui souhaitent une solution souple avec gaine
- qui se sondent directement dans les toilettes ou souhaitent raccorder une poche
- qui souhaitent une solution discrète même après utilisation

Un sondage facile dans les moindres détails

SpeediCath Flex : Flexible, Pratique, Discrète

> Flextip : Extrémité souple et olivaire


- L'extrémité flexible suit facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie et aide au passage de la prostate et des sphincters²⁹.
- L'extrémité est de forme olivaire pour prévenir les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l'urètre³⁰.

> Gaine de protection sèche et hermétique

- Prise en main de la sonde facile et propre.
- En circuit clos, cette gaine permet de conserver l'intégrité de la lubrification et évite la contamination par les bactéries extérieures³¹.

> Emballage discret et refermable

- Son format de poche aux couleurs neutres permet de faciliter le transport, de réduire l'encombrement lié au stockage.
- La sonde et l'emballage peuvent être refermés après utilisation pour une élimination propre et discrète.

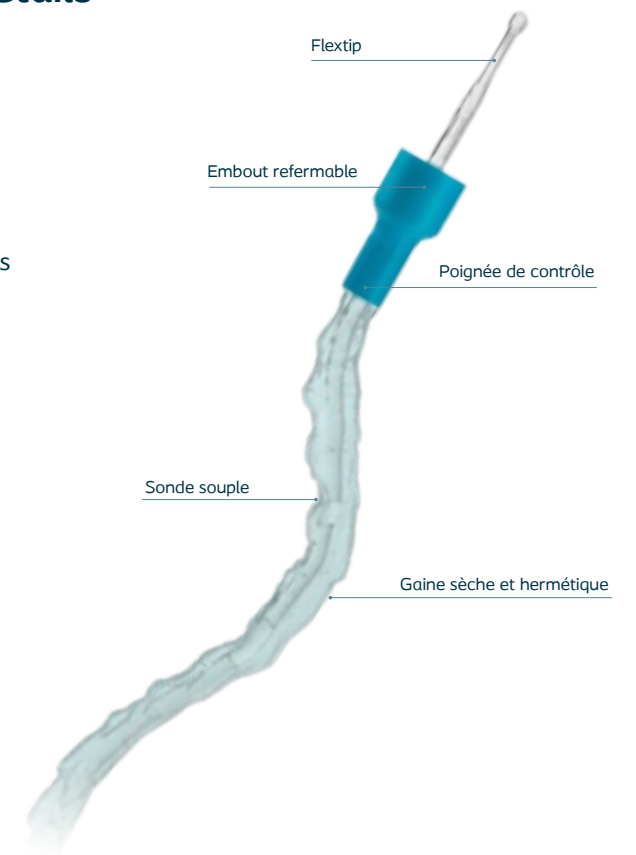

Intégralement remboursé*

Format de poche - Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 33 cm / Longueur totale : 44 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	289100	5708932124263
○ 12	289120	5708932124355
● 14	289140	5708932124447



Intégralement remboursé*

Format standard - Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 33 cm / Longueur totale : 44 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	289200	5708932765527
○ 12	289220	5708932765657
● 14	289240	5708932765923
● 16	289160	5708932766166



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Flex homme



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

SpeediCath® Flex Set

Un set de sondage doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs, conçu pour les hommes :

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution tout-en-un sèche au toucher
- qui souhaitent une solution souple avec gaine



SpeediCath® Flex Set : doux, hygiénique, simple à utiliser, ici ou ailleurs

> Flextip : Extrémité souple et olivaire

- L'extrémité flexible suit facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie et aide au passage de la prostate et des sphincters²⁹.
- Selon une étude, 86% des utilisateurs de sondes béquillées peuvent utiliser une sonde SpeediCath Flex²⁹.

> Gaine de protection et poche à urine sèches

- Prise en main de la sonde facile et propre grâce à sa gaine de protection
- Vidange facile et contrôlée de la poche à urine¹⁷
- La poche à urine est facile à déplier

> Emballage discret et refermable

- Le capuchon permet l'ouverture et la fermeture de la sonde
- La sonde et l'emballage peuvent être refermés après utilisation pour une élimination propre et discrète.
- Pour un sondage n'importe où et n'importe quand



Intégralement remboursé*

Poche graduée de 1 L

Boîte de 30 sets

Homme nelaton/droite

Longueur active : 33 cm / Longueur totale : 44 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	289310	5701780227971
○ 12	289320	5701780227995
● 14	289340	5701780228015
● 16	289360	5701780228039

 Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Flex Set



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



Extrémité flexible : Flextip ○

○ Anses de préhension

○ Poignée de contrôle

○ Gaine sèche

○ Languette à rompre

○ Une ligne prédécoupée

SpeediCath® Control

La sonde standard avec un système de contrôle renforcé

Un système conçu pour limiter les oscillations

> Facile à contrôler et à insérer¹¹

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
○ 12	272120	5708932505758

SpeediCath® Standard

La sonde standard

La 1^{ère} sonde hydrophile prête à l'emploi

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	274080	5708932505772
● 10	274100	5708932505796
○ 12	274120	5708932505819
● 14	274140	5708932505833
● 16	274160	5708932505857
● 18	274180	5708932505871

Homme tiemann/béquillée
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	274900	5708932505895
○ 12	274920	5708932505918
● 14	274940	5708932505932


Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Adolescent nelaton/droite
Longueur active : 26 cm / Longueur totale : 30 cm


CH	Référence	GTIN
● 08	276080	5708932506052
● 10	276100	5708932506076
○ 12	276120	5708932506090

Enfant nelaton/droite
Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	277060	5708932506113
● 08	277080	5708932506137
● 10	277100	5708932506151

 Vidéo d'utilisation
SpeediCath®
Standard homme



 Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Standard
homme en fauteuil



 Vidéo d'utilisation
SpeediCath®
Standard enfant



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



La gamme SpeediCath® pour femme

SpeediCath® Compact

SpeediCath® Compact Set

Le 1^{er} set de sondage compact commercialisé pour les femmes :

- qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes*
- qui souhaitent une solution tout-en-un discrète

Une simplicité prouvée^{16,18}

> Reconnu pour sa facilité d'utilisation^{16,18}

- 92% des patientes¹⁶ et 100% des professionnels de santé¹⁸ le trouvent facile à utiliser
- 98% des professionnels de santé trouvent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set¹⁸

> Hygiène :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique "no-touch"⁷

SpeediCath Compact Set, une solution à proposer à toutes vos patientes, en utilisation unique ou en complément à l'utilisation des sondes.



reddot design award
winner 2013*

Le "red dot" est aujourd'hui un concours de design professionnel reconnu internationalement dans le domaine, il récompense les designs les plus innovants au monde.

Intégralement remboursé**

Boîte de 20 sets
Femme nelaton/droite
Longueur active : 9 cm / Longueur totale : 15 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	285201	5708932557269
○ 12	285221	5708932533546
● 14	285241	5708932544870



Vidéo d'utilisation
SpeediCath®
Compact Set femme

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Gagnant 2013 du Prix du design "Reddot"

** Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 72,23 €TTC, remb. Séc. Soc. 72,23 €.

SpeediCath® Compact femme

La solution conçue pour les femmes :

- qui se sondent directement dans les toilettes
- qui souhaitent une solution discrète

Une Qualité de Vie améliorée¹⁰ Première sonde compacte du marché

> Une solution discrète :

- Grâce à son design compact et non médical

> Simple d'utilisation :

- Une sonde compacte facile à insérer⁵ et à contrôler

> Hygiénique :

- Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l'utilisateur
- Insertion sans toucher le corps de la sonde grâce à sa poignée de préhension (respect de la technique "no-touch")⁷

SpeediCath Compact Femme

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Femme nelator/droite
Longueur active : 7 cm / Longueur totale : 14 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	285760	5708932414586
● 08	285780	5708932416450
● 10	285800	5708932156721
○ 12	285820	5708932156745
● 14	285840	5708932156769

SpeediCath Compact Plus Femme

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Femme nelator/droite
Longueur active : 9 cm / Longueur totale : 16 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	288100	5708932439275
○ 12	288120	5708932439299
● 14	288140	5708932439312



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact femme

Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact femme en fauteuil

Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact enfant

Poche SpeediCath Compact

Poche à urine raccordable aux sondes de la gamme SpeediCath Compact

Intégralement remboursé**

	Référence	GTIN
Boîte de 30 poches		
0,75 l tub. 30 cm	210420	5708932185240
0,75 l tub. 50 cm	210860	5708932425216



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosodage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solide de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 80,87 €TTC, remb. Séc. Soc. 80,87 €.

** Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

*** SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design "Independent living - design awards"

SpeediCath® Compact Eve®

Notre dernière génération de sonde pour les femmes :

- qui se sondent directement dans les toilettes
- qui veulent une solution esthétique et discrète, même après utilisation

La sonde la plus discrète et féminine de notre gamme

> Une forme ergonomique pour une meilleure prise en main

- Un design intuitif
- Respect de la technique "no-touch" (sans contact avec le corps de la sonde)⁷
- Stabilité : la sonde ne roule pas lorsqu'elle est posée horizontalement

> Ouverture facile et fermeture sécurisée

- Ouverture facile en un seul geste, dans un sens ou dans l'autre
- Refermable hermétiquement, pour faciliter le transport et l'élimination¹⁹

> Connexion à la poche sécurisée

- Connecteur universel pour poche à urine intégré
- Risque de contamination exogène limité : la sonde reste protégée dans son conditionnement lors de la connexion

SpeediCath Compact Eve

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Femme nelator/droite
Longueur active : 8 cm / Longueur totale : 14 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	281100	5708932587549
○ 12	281120	5708932567756
● 14	281140	5708932587570



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Compact Eve



Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosodage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solide de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 80,87 €TTC, remb. Séc. Soc. 80,87 €.

** SpeediCath Compact Eve lauréat du prix du design "Reddot Design Award - Best of the Best 2015" ainsi que du prix "Design Award IF 2015"

SpeediCath® Standard

La sonde standard

La 1^{ère} sonde hydrophile prête à l'emploi



Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Enfant nelaton/droite
Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	277060	5708932506113
● 08	277080	5708932506137
● 10	277100	5708932506151

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Femme nelaton/droite
Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	275080	5708932505956
● 10	275100	5708932505970
○ 12	275120	5708932505994
● 14	275140	5708932506014
● 16	275160	5708932506038

 **Vidéo d'utilisation**
SpeediCath® Standard
femme



 **Vidéo d'utilisation**
SpeediCath® Standard
femme en fauteuil



EasiCath®

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

EasiCath et EasiCath Luer-Lock

Sondes hydrophiles autolubrifiées pour hommes et femmes

Le lubrifiant des sondes EasiCath s'hydrate après une immersion de 30 secondes dans l'eau : la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d'eau pour former un gel lubrifiant homogène.

L'embout Luer-Lock permet :

> L'apprentissage de l'autosondage

- Le système Luer-Lock sécurise le patient inexpérimenté qui peut placer tranquillement la sonde avant de retirer le bouchon pour libérer l'urine.

> Les instillations vésicales*

- L'embout Luer-Lock permet d'adapter une seringue sans aiguille contenant une solution et permet une connexion étanche. En effet, la seringue est directement raccordée à la sonde.



Intégralement remboursé**

Sondes EasiCath
Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	053480	5701780061704
● 10	053500	5701780061711
○ 12	053520	5701780047937
● 14	053540	5701780047944
● 16	053560	5701780061728
● 18	053580	5701780061735

Homme tiemann/béquillée 40
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	053800	5701780061742
○ 12	053820	5701780061759
● 14	053840	5701780061766
● 16	053860	5701780061773
● 18	053880	5701780061780

Femme nelaton/droite
Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	053680	5701780061674
● 10	053700	5701780061681
○ 12	053720	5701780047968
● 14	053740	5701780047951
● 16	053760	5701780061698

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Les sondes EasiCath ne sont pas remboursées dans l'indication instillations vésicales..

** Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Set EasiCath

Set de sondage hydrophile autolubrifié pour hommes, femmes et enfants.



Avantages

> Ouverture pré-découpée

> Site de blocage étanche

- Évite le risque de fuite.
- Après une immersion de 30 secondes dans l'eau, la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d'eau pour former un gel lubrifiant homogène.

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sets
Homme nelaton/droite
Longueur active : 34 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	280069	5701780175753
○ 12	280079	5701780175784
● 14	280089	5701780175814
● 16	280099	5701780175456
● 18	280109	5701780175463

Homme tiemann/béquillée
Longueur active : 34 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
○ 12	280179	5701780175500
● 14	280189	5701780175517
● 16	280199	5701780175524

EasiCath Set est composé de :

> Une sonde autolubrifiée EasiCath

> Une dosette de sérum physiologique pour hydrater le lubrifiant

> Une poche de recueil graduée de 700 ml

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sets
Femme nelaton/droite
Longueur active : 15 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	280019	5701780175630
● 10	280029	5701780175661
○ 12	280039	5701780175692
● 14	280049	5701780175722
● 16	280149	5701780175494

Enfant nelaton/droite
Longueur active : 15 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	280129	5701780175470
● 10	280139	5701780175487

Gamme Self-Cath

Self-Cath

Sondes sèches pour femmes



Intégralement remboursé*

Boîte de 20 sondes
Femme nelaton/droite
Longueur active : 12 cm / Longueur totale : 16 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	504609	5701780167666
● 10	504619	5701780167673
○ 12	504629	5701780167680
● 14	504639	5701780167697

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être inséré dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Dispositif médical destiné à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniens ou sondes urinaires)

Solutions sondes à demeure



Folysil® 100% silicone

- > Recommandée pour le sondage de longue durée, en pédiatrie et chez le patient allergique au latex^{22,23}
- > Durée de port ≤ 30 jours²³

Intégralement remboursé*

Sondes Folysil

Délivrable à l'unité, cond. par boîte de 5

Adulte nelaton/droite 41 cm ballonnet 10 ml

CH	Ballonnet	Référence	GTIN
○ 12	10 ml	HA6112	3600040242087
● 14	10 ml	HA6114	3600040242131
● 16	10 ml	HA6116	3600040242186
● 18	10 ml	HA6118	3600040242230
● 20	10 ml	HA6120	3600040242285
● 22	10 ml	HA6122	3600040242339
○ 24	10 ml	HA6124	3600040242384

Enfant nelaton/droite 30 cm
ballonnet 1,5-3 ml

CH	Ballonnet	Référence	GTIN
● 06	1,5 ml	HA6106	3600040241936
● 08	3 ml	HA6108	3600040241981
● 10	3 ml	HA6110	3600040242032

Longueur active : Longueur de la sonde qui peut être insérée dans le corps - Longueur totale : Longueur totale de l'extrémité de la sonde à l'extrémité du connecteur/godet

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



Folatex® latex enduction silicone

- > Utilisée pour le sondage de courte durée
- > Durée de port ≤ 14 jours²³

Intégralement remboursé*

Sondes Folatex

Délivrables à l'unité, conditionnées par boîte de 10

Homme nelaton/droite 38 cm ballonnet 5-15 ml

CH	Référence	GTIN
○ 12	HF1412	3600040910122
● 14	HF1414	3600040910153
● 16	HF1416	3600040910184
● 18	HF1418	3600040910214
● 20	HF1420	3600040910245
● 22	HF1422	3600040910276
○ 24	HF1424	3600040910306
○ 26	HF1426	3600040910337
○ 28	HF1428	3600040910368
○ 30	HF1430	3600040910399

Homme tiemann/béquillée 38 cm
ballonnet 5-15 ml

CH	Référence	GTIN
● 14	HF3714	3600040910603
● 16	HF3716	3600040910634
● 18	HF3718	3600040910665
● 20	HF3720	3600040910696

Femme nelaton/droite 22 cm ballonnet 5-15 ml

CH	Référence	GTIN
○ 12	HF3112	3600040910429
● 14	HF3114	3600040910450
● 16	HF3116	3600040910481
● 18	HF3118	3600040910511
● 20	HF3120	3600040910542
● 22	HF3122	3600040910573

Recommandations d'utilisation des sondes Folysil® et Folatex®*

Gonflez le ballonnet avec de l'eau stérile

Ne remplissez jamais le ballonnet avec du sérum physiologique. L'utilisation de sérum physiologique peut entraîner la formation de cristaux de sels qui bloquent le conduit de gonflage du ballonnet. Toute solution qui précipiterait ou cristalliserait peut être à l'origine de difficultés de dégonflage du ballonnet.

Utilisez un lubrifiant à base aqueuse


Les lubrifiants comme la vaseline et les lubrifiants à base d'huile de silicone sont déconseillés car ils altèrent les propriétés mécaniques du ballonnet et peuvent entraîner des éclatements ou des dégonflages du ballonnet.

Et pour mieux dégonfler le ballonnet :

- Lors du dégonflage du ballonnet, ne pas aspirer tout le liquide avec la seringue pour ne pas provoquer des plis sur le ballonnet pouvant être à l'origine de lésions urétrales lors du retrait de la sonde.



- Laissez (ou réinjectez) 1 ml de liquide lors du retrait de la sonde. Ce volume de liquide suffit à prévenir la formation de plis susceptibles de traumatiser le méat lors du retrait de la sonde.

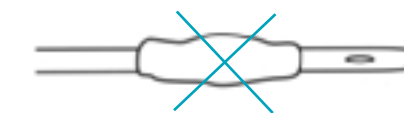

- Plus un ballonnet est resté gonflé longtemps, plus il est conseillé de le dégonfler lentement.

Sondage à demeure du patient à domicile

Sonde à demeure



> Utilisée pour le sondage de longue durée en pédiatrie et chez le patient allergique au latex (durée de port ≤ 30 jours)^{22,23}

ou



> Utilisée pour le sondage de courte durée (durée de port ≤ 14 jours)²³

+

Poche de jambe stérile Conveen® Triform



Conveen® Triform 0,5 l
Conveen® Attaches de jambe



ou

Conveen® Triform 1,5 l
+ Conveen® Attaches de jambe



+




Poche de nuit non stérile Conveen® pour les patients sous sondage vésical de longue durée en ambulatoire*

Conveen® 1,5 l



Conveen® 2 l

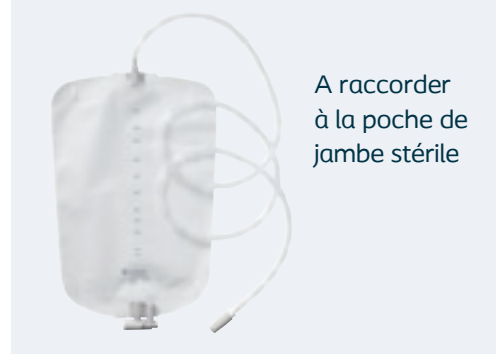

A raccorder à la poche de jambe stérile



Poches de jambe stériles Conveen® Triform 0,5 l et 1,5 l

Avantages des poches Conveen® Triform

UNE ASEPSIE CONTRÔLÉE

> Confort


- Voile doux
- Tubulure souple
- Soudure centrale pour une meilleure répartition des urines (Conveen® Triform 0.5L)

> Discrétion

- Matériau discret sous les vêtements

> Sécurité

- Valve anti-reflux
- Tubulure crenelée anti-coudage (Conveen® Triform 0.5L)
- Connecteur de forme conique et cranté pour sécuriser la connexion
- Pas de latex d'origine naturelle dans la composition du produit

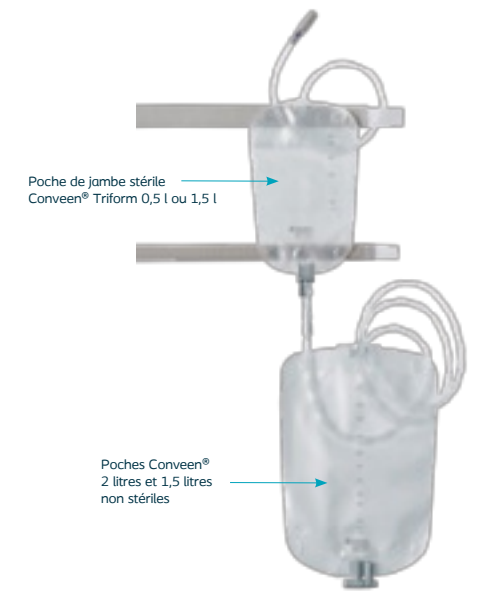

Poche de jambe stérile Conveen® Triform 0,5 l ou 1,5 l

Poches Conveen® 2 litres et 1,5 litres non stériles


Intégralement remboursé*

Poches de jambe stériles Conveen® Triform non ajustables et pré-montées
Boîte de 10 poches graduées

	Référence	GTIN
0,5 l tub. crenelée 50 cm	210190	5708932539425
1,5 l tub. lisse 90 cm	050630	5701780009645

Les solutions de maintien sur la jambe

Intégralement remboursé*

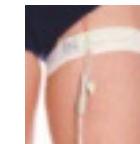

Conveen® Attaches de maintien

Boîte de 2 attaches - Maintien de la tubulure ou de la sonde à demeure sur le haut de la cuisse


	Référence	GTIN
90 cm ajustable	383004	5708932507233

Intégralement remboursé*

Largeur : 3,5 cm



Largeur : 2,5 cm

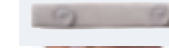

Conveen® Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10
Maintien de la poche à urine sur la jambe

	Référence	GTIN
	050501	5701780572491

Intégralement remboursé*



Conveen® Filets

Boîte de 2 filets

Taille	Circonférence	Référence	GTIN
● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
● Large	55-85 cm	783695	5708932507202



Poches non stériles à raccorder pour la nuit à la poche de jambe

Intégralement remboursé*



Poches à urine Conveen® 2 l et 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l tub. crenelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289

Vidéo d'utilisation

Poches de nuit Conveen



Les solutions de stabilisation : cf. page 38

* Recommandations du CCLIN Ouest, 2004. Hygiène en urologie. Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Chapitre C, page 45 à 47 : Le changement des poches de nuit est effectuée quotidiennement.

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Principe du système collecteur

Pour le retour au domicile de votre patient, il existe des solutions adaptées au degré de sévérité de l'incontinence urinaire :

Etui pénien Conveen® Optima


Longueur de la verge > 5cm : Conveen® Optima
Longueur de la verge ≤ 5 cm : Conveen® Optima Specific



Poche à urine Conveen®

Si incontinence légère à modérée*

Poche de jambe
Conveen® Active 250 ml

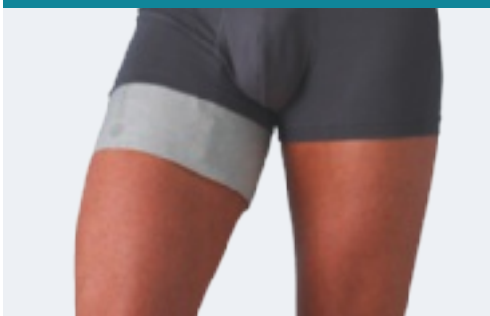

Si incontinence modérée à sévère*

Poches de jambe
Conveen® 0.5 l, 0.75 l ou 1.5 l



et/ou

Poches de nuit Conveen® 1,5L - 2L - 2L Basic



Conveen® 1,5 l




Conveen® 2 l



Conveen® 2 l Basic

Etui pénien
Conveen® Optima

Poche de jambe
Conveen

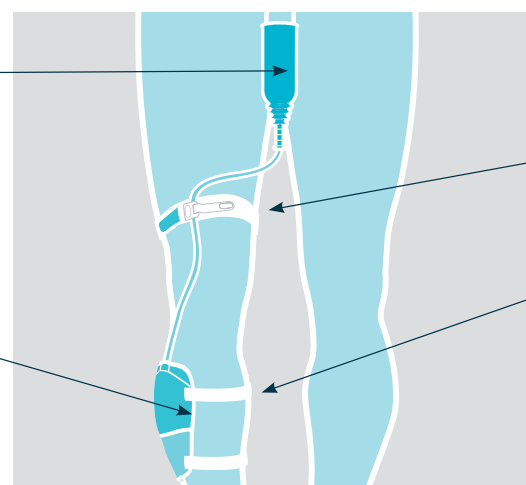

Attache de
maintien Conveen
(facultatif)**

Attache de jambe
Conveen

* Définition de l'incontinence légère à modérée et modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

** Permet d'éviter les tractions sur l'étui pénien lors des déplacements

Conveen® Optima

Préférable aux
protections
absorbantes
par 2 hommes
sur 3²⁴

Bulbe anti-coudage
Matériau PSX** associé
à la partie adhésive
Double languette
de déroulement
pour une pose
facilitée



PREMIÈRE PRESCRIPTION

Boîte de 15 étuis pour essai

Intégralement remboursé*

Conveen® Optima

Boîtes de 15 étuis péniers standard auto-adhésifs sans latex
Version Standard 7,8 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	220259	5701780177733
● 28	220289	5701780177740
● 30	220309	5701780177757
● 35	220359	5701780177764
● 40	220409	5701780177771

Intégralement remboursé*

Conveen® Optima Specific

Boîtes de 15 étuis péniers courts auto-adhésifs sans latex
Version Courte 4,6 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	221219	5701780177788
● 25	221259	5701780177795
● 30	221309	5701780177801
● 35	221359	5701780177818

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Polysiloxane.

Boîte de 15 pour 1^{ère} dispensation : disponible uniquement en ville

Pour quels patients ?

> Hommes incontinents urinaires :

- âgés
- suite à une chirurgie (prostate, vessie)
- souffrant d'affection neurologique (blessés médullaires, syndrome de la queue de cheval, sclérose en plaques, Parkinson, AVC...)
- souffrant d'un diabète compliqué

Les bénéfices pour vos patients

- > Maîtrise des odeurs²⁴
- > Meilleure estime de soi qu'avec des protections absorbantes²⁴
- > Respect de l'état cutané²⁴
- > Par mesure d'hygiène, il convient de changer l'étui quotidiennement²³
- > Sans latex : absence de risque d'allergie cutanée liée au latex

2 longueurs pour s'adapter à l'anatomie de chaque homme



Longueur totale du "corps" de l'étui : 7,8 cm



Longueur totale du "corps" de l'étui : 4,6 cm

RENOUVELLEMENT D'ORDONNANCE

Boîte de 30 étuis pour délivrance

Intégralement remboursé*

Conveen® Optima

Boîtes de 30 étuis péniers standard auto-adhésifs sans latex
Version Standard 7,8 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 25	220250	5708932244963
● 28	220280	5708932851329
● 30	220300	5708932220255
● 35	220350	5708932220279
● 40	220400	5708932224987

Intégralement remboursé*

Conveen® Optima Specific

Boîtes de 30 étuis péniers courts auto-adhésifs sans latex
Version Courte 4,6 cm

Diam.	Référence	GTIN
● 21	221210	5708932244879
● 25	221250	5708932244893
● 30	221300	5708932244916
● 35	221350	5708932244930

Vidéo d'utilisation
Conveen® Optima




Les points forts des étuis Conveen® Optima

L'étui pénien de dernière génération



Sécurité

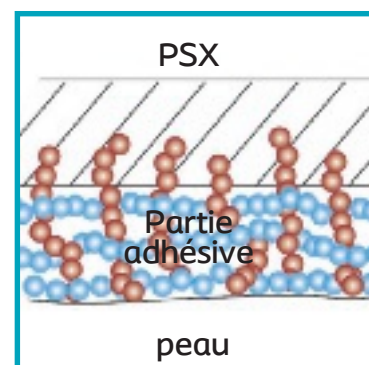

- > **Bonne tenue et respect de l'épiderme**
- Maîtrise efficacement les fuites urinaires²⁴
 - Etui en PSX* : matériau souple pour une bonne conformabilité autour de la verge



- > **Ajustement à l'anatomie**
- 2 longueurs (4,6 cm et 7,8 cm) et 6 diamètres



Connexion sécurisée



- > **Système anti-fuites**
- Son bulbe en accordéon évite l'infiltration des urines sous l'étui en garantissant leur bon écoulement.



- > **Raccordement hermétique renforcé**
- Embout strié et bague pour faciliter la connexion à la poche de recueil

Pénis

Mesureur



Chaque homme est unique, Conveen® Optima existe donc en différents diamètres et longueurs afin d'assurer une mise en place adaptée.

Il est nécessaire que votre patient porte la taille d'étui pénien qui lui convient.

Pour définir celle-ci, utilisez un guide de mesure qui peut être demandé gratuitement à notre service clients au : **01 56 63 18 00**



Application facilitée



- > **Simplicité de pose, même avec des gants**
- Sa double languette d'application permet un déroulement uniforme de l'étui



Emballage compact



- > **Discrétion**
- Coque individuelle (5 x 6 cm) et boîte compacte (15,8 x 13 cm) : encombrement minimal et transport facilité.

Conveen® Optima*, une solution validée cliniquement


Etude randomisée Loi Huriet ayant fait l'objet d'une publication dans le British Journal of Urology International en 2011²⁴

Auteurs : E. Chartier-Kastler, P. Ballanger, J. Petit, M. Fourmarier, S. Bart, E. Ragni-Ghazarossian, A. Ruffion, L. Le Normand et P. Costa

Comparativement aux protections absorbantes, Conveen® Optima* est préféré par 2 hommes sur 3 et améliore la qualité de vie.

Objectif principal

Evaluer l'impact des étuis péniens ou des protections absorbantes sur la qualité de vie (QdV) des patients hommes présentant une incontinence urinaire (IU) modérée à sévère.

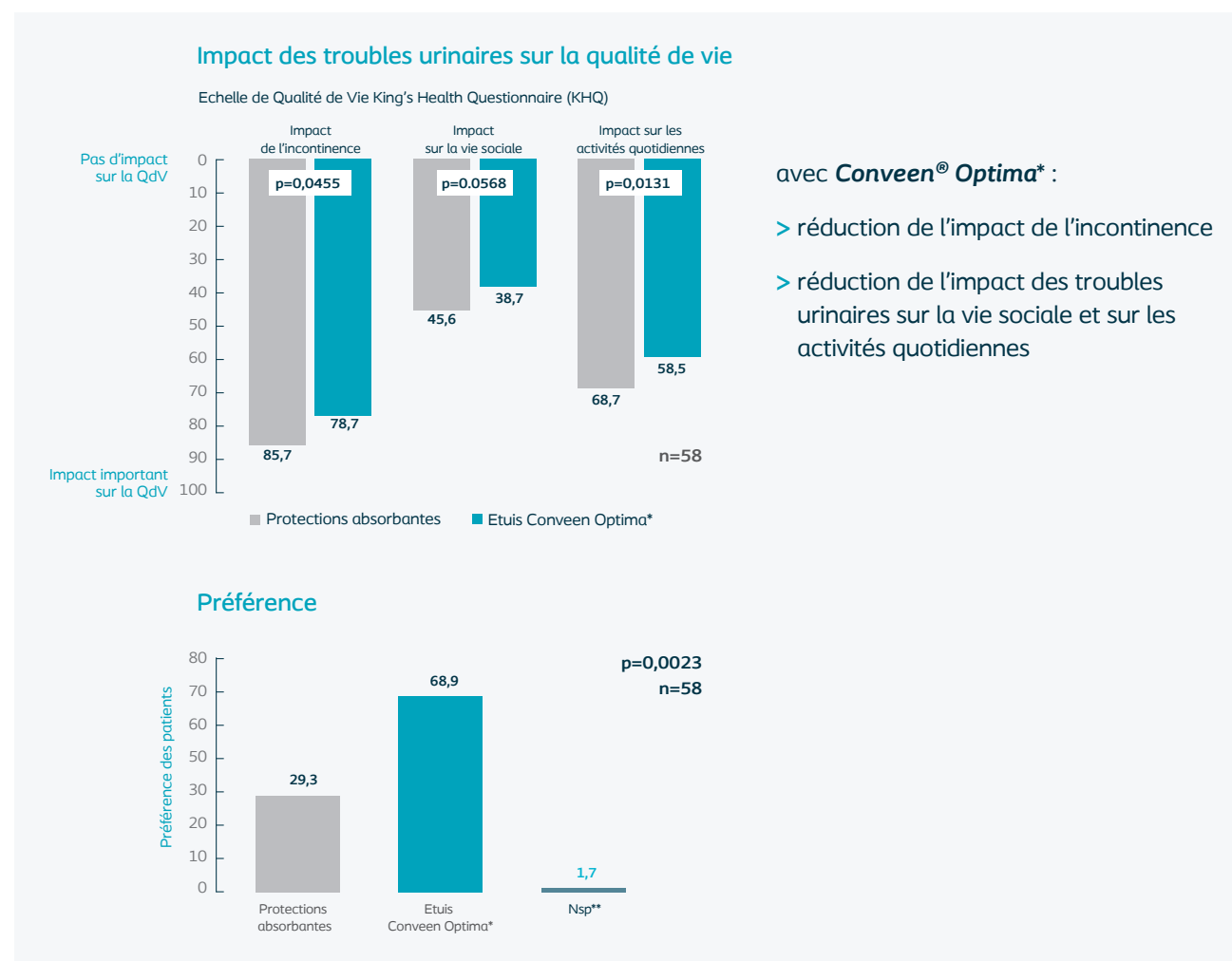

* Associé à une poche Conveen
** Ne se prononcent pas

Les étuis péniens, une solution reconnue par les sociétés savantes et possible pour la HAS

EAU 2012 Grade A**

Lucas M.G. et al. Guidelines on Urinary Incontinence. European Association of Urology 2012, page 31

" Les étuis péniens sont à proposer en cas d'incontinence urinaire masculine sans rétention associée. Ne pas utiliser de pinces à verge pour contrôler l'incontinence. "

CODIMS AP-HP 2009

Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Recommandations codims ap-hp. décembre 2009, page 40

" Les étuis péniens peuvent être utilisés dans les cas d'incontinence urinaire chez l'homme après intervention chirurgicale, vessie neurologique ou chez les personnes âgées. Ils sont proposés de préférence en alternative aux protections absorbantes lorsqu'ils sont médicalement possibles. "

Guide AVC HAS 2007

Guide - affection longue durée. Accident vasculaire cérébral. Haute autorité de santé. Mars 2007, page 12

" Le port des étuis péniens peut être proposé chez des hommes souffrant d'incontinence urinaire. "

SPILF-AFU 2002

Infections urinaires nosocomiales de l'adulte. Conférence de Consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) et l'Association Française d'Urologie (AFU). Novembre 2002, page 26

" L'étui pévien en alternative au sondage à demeure est préférable lorsqu'il est médicalement possible. "


EAU : European Association of Urology
CODIMS AP-HP : Comité du Dispositif Médical de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
AVC HAS : Accident Vasculaire Cérébral Haute Autorité de Santé
SPILF : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
AFU : Association Française d'Urologie

** Une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des études de fort niveau de preuve : PAR EXEMPLE, essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur, méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, analyse de décision fondée sur des études bien menées.

L'étui pévien, une solution à privilégier pour vos patients

Les étuis péviens Conveen® Optima, des performances démontrées²⁴ en termes :

- d'efficacité
- de sentiment de liberté
- de maîtrise des odeurs
- de sentiment de sécurité
- d'estime de soi
- de respect de l'état cutané
- de discrétion

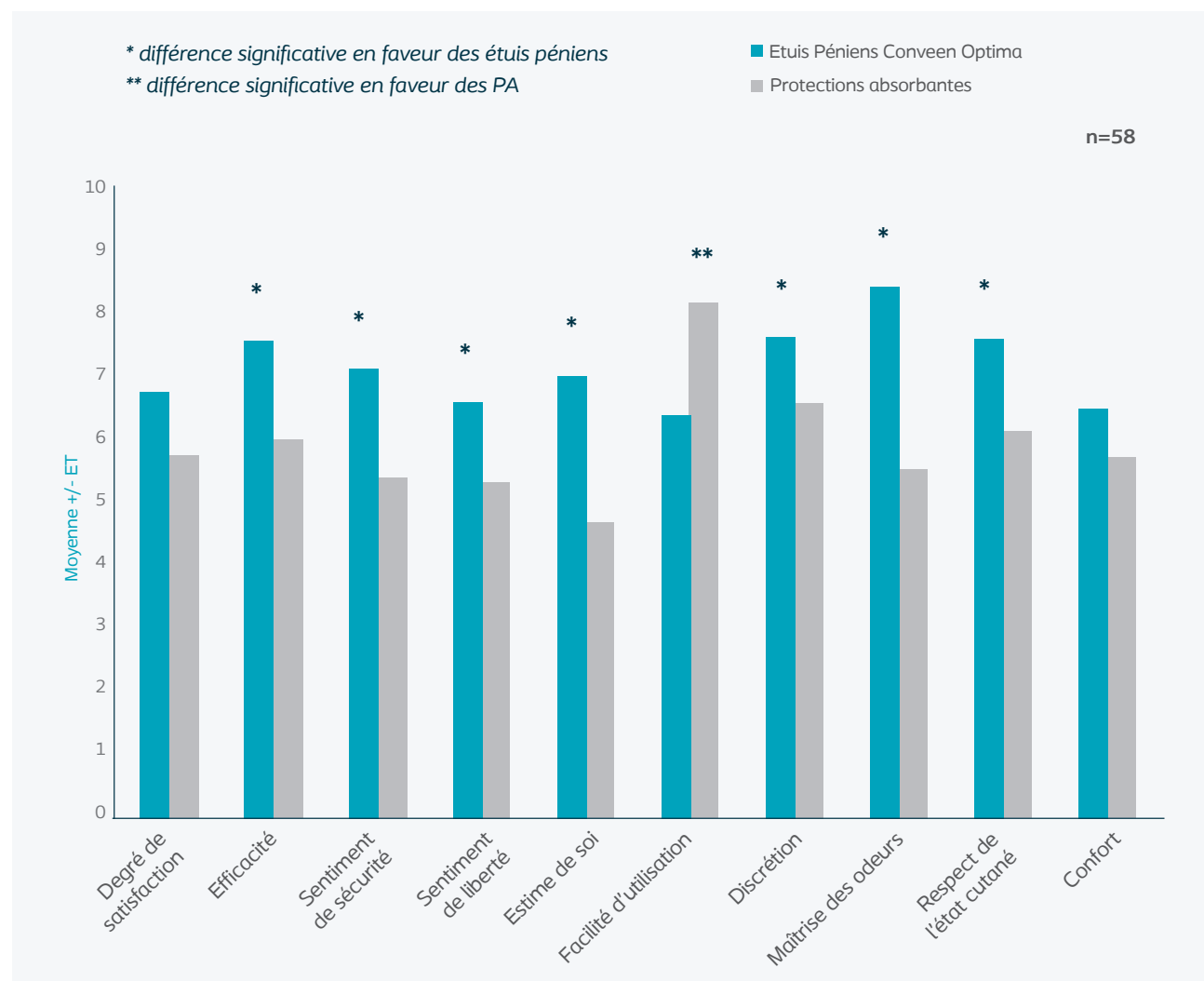

« Les étuis péviens participent à la bienveillance d'un patient. Ils permettent d'éviter un dommage lié aux soins, qui pourrait être causé par une prise en charge non adaptée de l'incontinence. »²⁵



Penilex® Silicone

Intégralement remboursé*			Intégralement remboursé*			Intégralement remboursé*		
Boîte de 30 étuis péviens silicone pour délivrance Normal 8,1 cm			Boîte de 30 étuis péviens silicone pour délivrance Spécial (étui court) 4,2 cm			Boîte de 30 étuis péviens silicone pour délivrance Plus (surface adhésive large) 8,1 cm		
Diam.	Référence	GTIN	Diam.	Référence	GTIN	Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA5025	3600040251430	● 25	PA7025	3600040252062	● 25	PA6025	3600040251836
● 30	PA5030	3600040251485	● 30	PA7030	3600040252093	● 30	PA6030	3600040251881
○ 32	PA5032	3600040251539	○ 32	PA7032	3600040252123	○ 32	PA6032	3600040251935
● 35	PA5035	3600040251584	● 35	PA7035	3600040252154	● 35	PA6035	3600040251980
● 40	PA5040	3600040251638	● 40	PA7040	3600040252185	● 40	PA6040	3600040252031

Boîte de 15 étuis péviens silicone pour essai Normal 8,1 cm			Boîte de 15 étuis péviens silicone pour essai Spécial (étui court) 4,2 cm			Boîte de 15 étuis péviens silicone pour essai Plus (surface adhésive large) 8,1 cm		
Diam.	Référence	GTIN	Diam.	Référence	GTIN	Diam.	Référence	GTIN
● 25	PA5225	3600040325292	● 25	PA7225	3600040325414	● 25	PA6225	3600040325353
● 30	PA5230	3600040324479	● 30	PA7230	3600040324776	● 30	PA6230	3600040324622
○ 32	PA5232	3600040324509	○ 32	PA7232	3600040324806	○ 32	PA6232	3600040324653
● 35	PA5235	3600040325322	● 35	PA7235	3600040325445	● 35	PA6235	3600040325384
● 40	PA5240	3600040324561	● 40	PA7240	3600040324868	● 40	PA6240	3600040324714



Conveen® Security

Intégralement remboursé*		
Boîte de 30 étuis péviens auto-adhésif sans latex pour délivrance Version Standard 8,2 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 21	052210	5701780758864
● 25	052250	5701780592093
● 30	052300	5701780592109
● 35	052350	5701780592116

Boîte de 15 étuis péviens auto-adhésif sans latex pour essai Version Standard 8,2 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 21	052219	5701780174152
● 25	052259	5701780174169
● 30	052309	5701780174176
● 35	052359	5701780174183



Conveen® 1 pièce Latex

Intégralement remboursé*		
Boîte de 30 étuis péviens latex auto-adhésifs + 6 raccords pour délivrance Conveen® Etui pévien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 25	052000	5701780009935
● 30	052050	5701780009928
● 35	052100	5701780009911

Boîte de 15 étuis péviens latex auto-adhésifs + 6 raccords pour essai Conveen® Etui pévien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 25	052009	5701780174121
● 30	052059	5701780174138
● 35	052109	5701780174145

Conveen® Security Specific

Intégralement remboursé*		
Boîte de 30 étuis péviens auto-adhésifs sans latex pour délivrance Version Courte 5 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 21	220110	5701780751599
● 25	220120	5701780748131
● 30	220130	5701780748155
● 35	220140	5701780748179

Boîte de 15 étuis péviens auto-adhésif sans latex pour essai Version Courte 5 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 21	220119	5701780174190
● 25	220129	5701780174206
● 30	220139	5701780174213
● 35	220149	5701780174220



Conveen® 2 pièces Latex

Boîte de 30 étuis péviens latex avec joint de fixation + 6 raccords Conveen® Etui pévien latex avec joint de fixation 10,5 cm		
Diam.	Référence	GTIN
● 20	051200	5701780008488
● 25	051250	5701780008471
● 30	051300	5701780008464
● 35	051350	5701780008457

Boîte de 15 pour 1^{ère} dispensation : disponible uniquement en ville

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.



Incontinence légère à modérée (<250 ml**)

Poche de jambe Conveen® Active 250 ml



> Système d'attaches intégré



> Discretion et confort

- Poche positionnée vers l'intérieur de la cuisse pour plus de discrétion
- Robinet escamotable, invisible même sous un short
- Poche recouverte d'un voile doux : conçu pour éviter qu'elle ne colle à la peau en cas de transpiration et ainsi prévenir les complications cutanées



> Tubulure courte et ajustable



> Fixation sécurisée

- Patch adhésif en silicone repositionnable vient renforcer la fixation à la cuisse.

Intégralement remboursé*

Poche Conveen® Active

Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré

	Référence	GTIN
Poche 250 ml Tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568

Vidéo d'utilisation
Poches Conveen® Active



Dr Dupont
26 rue de la Source
54000 NANCY le 23/02/2023
M. Durand (58 ans)

- Etuis péniens Conveen® Optima standard, diamètre 30, 1 boîte
- Poches Conveen® Active 250 ml, 1 boîte
- Conveen® Poche de nuit 2 L, 1 boîte

Attention : précisez bien les marques Conveen, Conveen® Optima et Conveen® Active

Signature



Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml**)

Poches de jambe Conveen® 0,5 l - 0,75 l - 1,5 l



Intégralement remboursé*

Conveen® poches de jambe

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227
0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610	5708932498241
0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265
1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289

> Pour la journée : discrétion et sécurité

- **Sécurité**
Tubulure ajustable crénelée anti-coudage (0,5 l et 0,75 l)
- **Facilité d'utilisation**
Robinet de vidange intuitif (à clapet)
- **Discrétion et confort**
Forme anatomique et voile doux
Matière souple et peu bruyante
Discrète sous les vêtements

> Poches graduées

Par mesure d'hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement***

Vidéo d'utilisation
Poches de jambe Conveen



Les solutions de maintien sur la jambe

Intégralement remboursé*

	Référence	GTIN
90 cm ajustable	383004	5708932507233

Largueur : 3,5 cm

Largueur : 2,5 cm

Intégralement remboursé*

Conveen® Attaches de jambe

Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10

	Référence	GTIN
	050501	5701780572491

Intégralement remboursé*

Conveen® Filets

Boîte de 2 filets

Taille	Circonférence	Référence	GTIN
● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
● Large	55-85 cm	783695	5708932507202

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

*** Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : Changement de la poche de nuit quotidien.

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Définition de l'incontinence légère à modérée : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.



Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml**)

Poches de nuit Conveen®



Pour la nuit :

> Risque de chute du patient limité

- Grande contenance évitant au patient de se lever la nuit

> Sécurité

- STubulure crénelée anti-coudage de 140 cm pour la poche de 2 l

> Système anti-fuites

- Robinet de vidange sécurisée pour la poche de 2 l
- Robinet de vidange intuitif (à clapet) pour la poche 1,5 l
- Matériau résistant

> Valve anti-reflux

- Maîtrise du risque infectieux

> Poches graduées

- Meilleur suivi de la diurèse

Intégralement remboursé*

Conveen® 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
1,5 l	050620	5708932498289

tub. lisse 90 cm ajustable

Intégralement remboursé*

Conveen® 2 l

Boîte de 30 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l	213460	5701780820615

tub. crénelée 140 cm ajustable

Intégralement remboursé*

Conveen® Basic 2 l - Sans boutonnières

Boîte de 10 poches graduées

	Référence	GTIN
2 l	218030	5708932973540

tub. lisse 100 cm

Vidéo d'utilisation

Poches de nuit Conveen



Par mesure d'hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement***

Les solutions de stabilisation



Conveen® Porte-poche de lit

Pour une utilisation avec les poches Conveen® 2 l ou 1,5 l
Vendu par boîte de 10

Référence	GTIN
050700	5701780009652



Conveen® Porte-poche de sol

Pour une utilisation avec les poches Conveen® 2 l ou 1,5 l
Vendu à l'unité

Référence	GTIN
380431	5708932263313

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

*** Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : Changement de la poche de nuit quotidien.

Accessoires

Conveen® Protact



Crème barrière conçue pour protéger la peau contre les irritations légères dues à l'urine et aux matières fécales :

- adoucit la peau **
- la protège grâce à son effet barrière contre l'humidité
- forme un film transparent permettant l'observation de l'état cutané

Conveen® Protact

Délivrable à l'unité, cond par boîte de 12
Tube de 100 g

Référence	GTIN
651001	5708932723442

Lingettes pour toilette intime Brava®



Les lingettes pour toilette intime Brava sont destinées à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniers ou sondes urinaires).

Lingettes Brava

Sachet de 15 lingettes

Référence	GTIN
120801	5708932135146

Conveen® Prep



Protection des peaux sensibles ou traumatisées exposées aux adhésifs, à l'urine, aux fèces, ou aux frottements.

Conveen® Prep pour étuis péniers

Boîte de 54 compresses imprégnées

Référence	GTIN
620420	5701780768375

Retrait d'adhésif Brava®



Le spray et la lingette pour retrait d'adhésif Brava® :

- offrent un retrait facile des adhésifs médicaux
- n'interfèrent pas avec l'adhésivité des appareillages
- à base de silicone, la solution ne pique pas (sans alcool) et sèche en quelques secondes

Intégralement remboursé*

Spray pour retrait d'adhésif Brava® 50 ml

Conditionnement unitaire

Référence	GTIN
120101	5708932740463

Lingette pour retrait d'adhésif Brava®

Boîte 30 lingettes

Référence	GTIN
120115	5708932503693

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Du fait de la présence de substances émoullientes

Peristeen® Plus Irrigation Transanale



Peristeen® Plus s'appuie sur les preuves cliniques de Peristeen :

- > **Efficacité**²⁶
Réduction significative de la constipation (Score de Cleveland : 10.3 vs 13.2 [p=0.0016]) et des fuites fécales (Score St Mark : 5.0 vs 7.3 [p=0.015]).
- > **Réduction des infections urinaires symptomatiques**²⁶
Diminution de la survenue des infections urinaires symptomatiques nécessitant une antibiothérapie : 15,5% à 5,9% [p=0.0052].
- > **Gain de temps**²⁶
Peristeen permet de réduire le temps de gestion du transit : 74,4 à 47 min [p=0.04].
- > **Amélioration de la qualité de vie**²⁶



Peristeen Plus est un système d'irrigation transanale :

- Simple à manipuler
- S'utilise avec de l'eau tiède
- Une irrigation doit être exécutée quotidiennement au début, et devrait être réduite à un jour sur deux si possible après environ 10 à 14 jours³²
- Réduction de la dépendance à une tierce personne²⁶

“ Peristeen Plus m'a aidé à prendre le contrôle de mes problèmes de transit et à éviter que ce soit eux qui contrôlent ma vie ”

Utilisateur français



La sonde rectale à ballonnet 1

- > Maintien de la sonde dans l'ampoule rectale et étanchéité lors de l'irrigation
 - > Autolubrifiée, pour faciliter l'introduction
- Elle est à **usage unique**.

La poche à eau avec indicateur de température 2

- > Grâce à son design breveté, la poche est **stable**, même posée sur le sol
- > Indication du volume sur la poche pour le suivi de l'irrigation
- > Indicateur de température pour une température d'eau adéquate pour l'irrigation

Il est recommandé de la changer **tous les mois** soit toutes les 15 utilisations**. Le bouchon doit être **conservé pendant 90 utilisations**** et sera fourni lors de la prescription d'un nouveau système initial.

L'unité de contrôle 3

- > Pas besoin de la gravité pour réaliser l'instillation de l'eau ni d'une tierce personne
- > Dispositif ergonomique, **pouvant être utilisé** même par les patients ayant une dextérité manuelle réduite²⁶

Elle fait partie du **système initial** et doit être changée toutes les 90 utilisations (soit par exemple tous les 6 mois dans le cadre d'une irrigation 1 jour sur 2), elle est fournie lors de la prescription d'un nouveau système initial.

Intégralement remboursé*

Peristeen Plus sonde à ballonnet Sondes standard (125 mm) à usage unique

	Référence	GTIN
Système initial 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe	291410	5701780235686
Sondes rectales 15 sondes rectales + 1 poche	291420	5701780235808
Tubulures 2 tubulures avec connecteur	291460	5701780236829

Peristeen Plus sonde à ballonnet Sondes courtes (115 mm) à usage unique

	Référence	GTIN
Système initial 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales courtes + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe	291480	5701780237482
Sondes courtes 15 sondes rectales courtes + 1 poche	291490	5701780237574
Tubulures 2 tubulures avec connecteur	291460	5701780236829


Les complications de l'irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations anales ont été identifiés suite à la pratique d'irrigation colique. Il est important d'informer le patient qu'il doit contacter immédiatement son médecin ou un service d'urgences si il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle s'accompagne de fièvre, d'un saignement anal prolongé.

* Intégralement remboursé dans l'indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire. La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastro-entérologue, soit par un chirurgien viscéral ou pédiatrique, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. L'irrigation transanale pourra être effectuée tous les deux ou trois jours, à l'issue d'une phase d'initiation. Les traitements de première intention pourront être poursuivis. Peristeen Plus doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l'utilisation de ce dispositif, notamment à l'auto-sondage. L'implication d'infirmières formées à la technique ou de stomathérapeutes est recommandée pour l'apprentissage de la technique et peut être nécessaire lors de sa poursuite. Peristeen Plus Système initial (boîte de 1) : prix limite de vente au public 104,95 € TTC, remb. Séc. Soc. 104,95€. Peristeen Sondes rectales (boîte de 15) : prix limite de vente au public 173,83€ TTC remb. Séc. Soc. 173,83€. Peristeen Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 20,16€ TTC, remb. Séc. Soc. 20,16€.


** Dans le cadre d'une irrigation un jour sur deux.

Irrigation transanale : une méthode qui fonctionne

Images scintigraphiques du cadre colique ²⁸

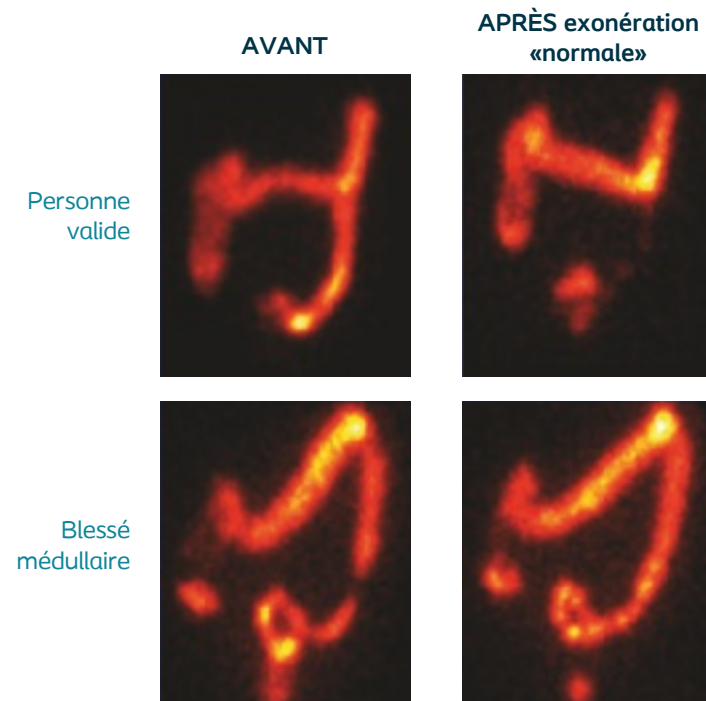

Images scintigraphiques d'un patient neurologique atteint de troubles colorectaux avant et après recours à l'irrigation transanale avec Peristeen

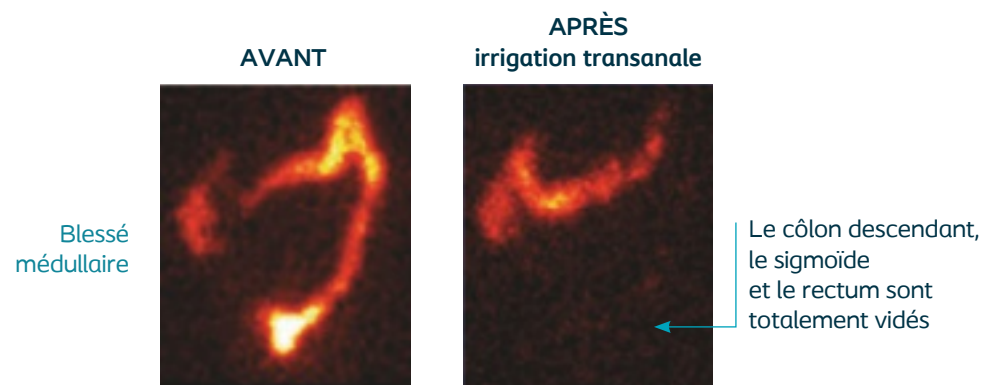


Peristeen® Plus : Une efficacité basée sur les preuves cliniques de Peristeen®


Etude clinique contrôlée ²⁶

- > Etude internationale* multicentrique, comparative, contrôlée, randomisée réalisée sur 87 patients présentant une lésion médullaire.
- > Comparant : Peristeen Irrigation Transanale aux traitements médicaux conventionnels
- > Durée : 10 semaines


Diminution significative ($p < 0.05$) de l'incontinence fécale et de la constipation objectivée à l'aide d'échelles validées.

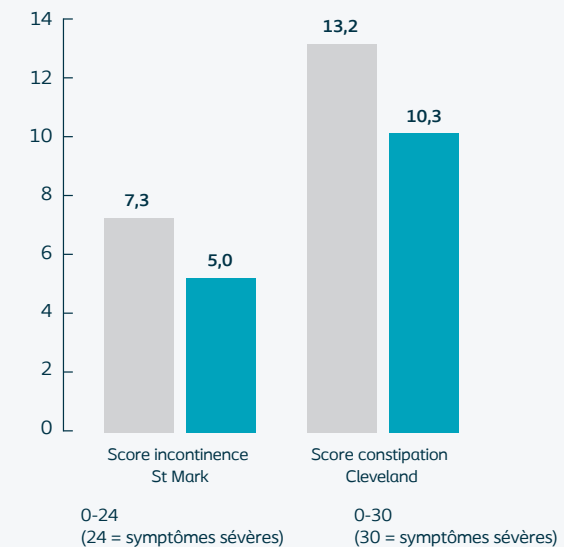


Diminution significative ($p = 0.04$) du temps passé à l'exonération

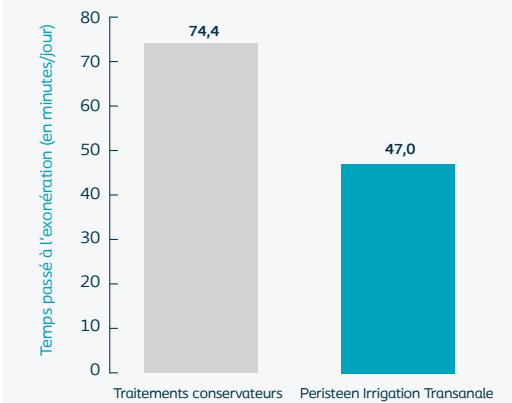

Réduction significative ($p < 0.01$) des infections urinaires symptomatiques

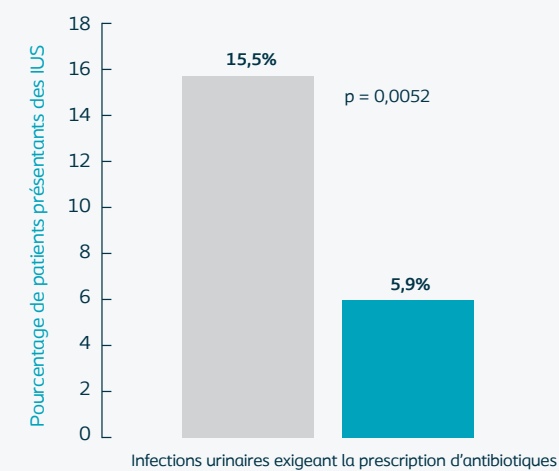

Amélioration de 50% du score de qualité de vie

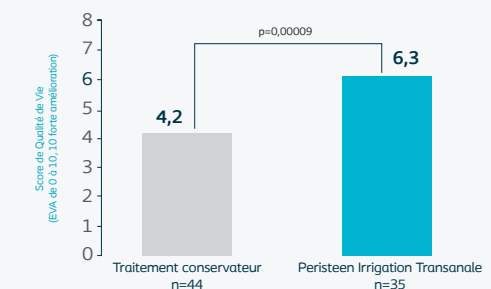

Traitement conservateurs Peristeen

Peristeen® Plus sonde rectale conique

Développé avec la contribution de **chirurgiens digestifs** et de **stomathérapeutes** pour répondre aux besoins anatomiques des patients atteints de LARS.



- + Sa forme
- + Sa longueur
- + Sa flexibilité

Vidéo d'utilisation
Peristeen Plus sonde rectale conique

Intégralement remboursé*

Peristeen Plus sonde rectale conique
Sondes coniques à usage unique

	Référence	GTIN
Système initial 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche + 1 paire d'attaches de jambe	291610	5701780238427
Sondes rectales 15 sondes rectales + 1 poche	291420	5701780238489
Tubulures 2 tubulures avec connecteur	291461	5701780281317


* symptomatique du syndrome de résection antérieure du rectum (LARS) chez les patients en échec d'un traitement conventionnel bien conduit. La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastro-entérologue, soit par un chirurgien viscéral. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. L'irrigation transanale pourra être effectuée tous les 2 ou 3 jours, à l'issue d'une phase d'initiation. Les traitements de première intention pourront être poursuivis. Peristeen Plus Sonde rectale conique doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l'utilisation de ce dispositif, notamment à l'auto-sondage. L'implication d'infirmiers formés à la technique ou de stomathérapeutes est recommandée pour l'apprentissage de la technique et peut être nécessaire lors de sa poursuite. Peristeen Plus Sonde rectale : Système initial : prix limite de vente au public 110,14 €TTC, remb. Séc. Soc. 110,14€. Sonde rectale conique (boîte de 15) : prix limite de vente au public 182,38€TTC remb. Séc. Soc. 182,38€. Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 20,16€TTC, remb. Séc. Soc. 20,16€.

Etude clinique contrôlée²⁷


- > Etude multicentrique randomisée, contrôlée réalisée sur 32 patients, 30 analysés à distance à 3 mois minimum de remise en continuité de la stomie et présentant un score LARS majeur (>30).
- > Comparant : Peristeen sonde rectale conique au traitement conventionnel
- > Critère principal : amélioration du score LARS à 3 mois
- > Durée : 12 semaines

À 3 mois


Réduction significative du score LARS

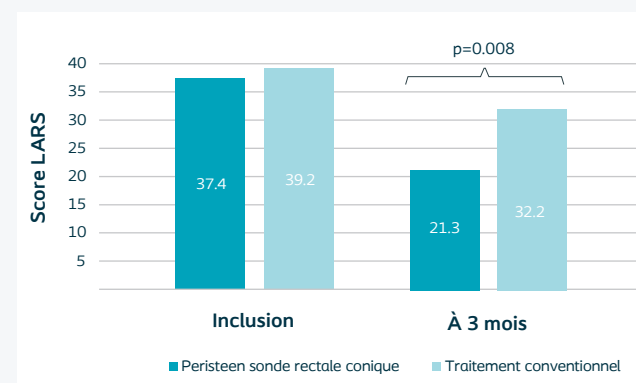

60% des patients n'ont plus de LARS

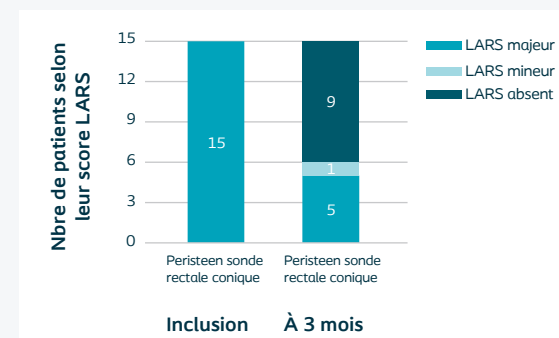

Réduction significative du temps passé à l'exonération

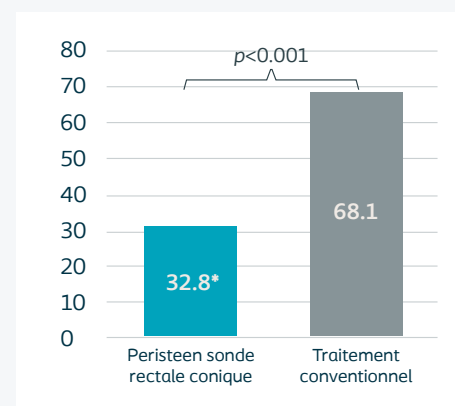

Temps (min) passé aux exonérations et aux épisodes d'incontinence après 3 mois de suivi

Le nombre d'exonérations diurnes et nocturnes est significativement plus faible en comparaison des traitements conventionnels

	ITA (Peristeen®sonde rectale conique)	Traitement conventionnel
☀	1.4 (0.9; 2.1)	3.8 (2.7; 5.4)
🌙	0.29 (0.18; 0.48)	1.14 (0.58; 2.26)

Nombre de visites quotidiennes aux toilettes après 3 mois de suivi, moyenne (95% IC)

DOCUMENTATIONS – Professionnels


Coloplast vous soutient dans votre démarche d'information, et met à votre disposition un ensemble d'outils et de supports, pour vous accompagner au quotidien.

De nombreux outils ont été conçus par des professionnels de santé (médecins, stomathérapeutes, infirmières) pour permettre aux équipes soignantes d'améliorer la prise en charge des patients.


Fiches produits & de références



247Z
Brochure Gamme

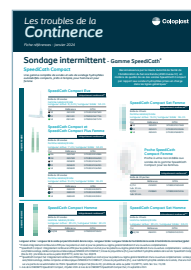

209Z
Brochure Références

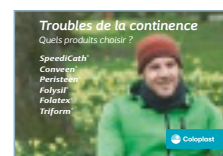

1161Z : Fiches
Incollables


Bloc d'aide à la délivrance

Sondage Intermittent



208C : Bloc
d'aide à la
délivrance Sondes

Etuis péniens et poches à urine

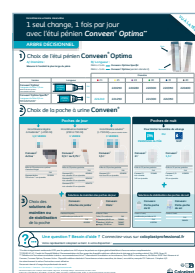

1582E : Poster
arbre décisionnel
Conveen



1995E : Bloc
d'aide à la délivrance
Conveen



2149E : Fiche
de liaison pour
la prescription

Auto sondage Intermittent




2747C :
Les règles d'or
Version Homme



2748C :
Les règles d'or
Version Femme

Sondage à Demeure

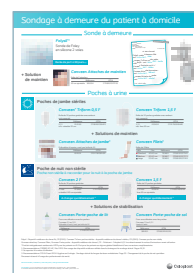

1686E : Poster
Sondage à Demeure

Gamme Peristeen Plus



2794P : Bloc d'aide
à la délivrance

Guides de bonnes pratiques

Gamme Peristeen




2797P : Guide pratique du
professionnel de santé



2800P : Protocole de soin
Peristeen Plus

Coloplast au service de vos patients Service Relations Utilisateurs

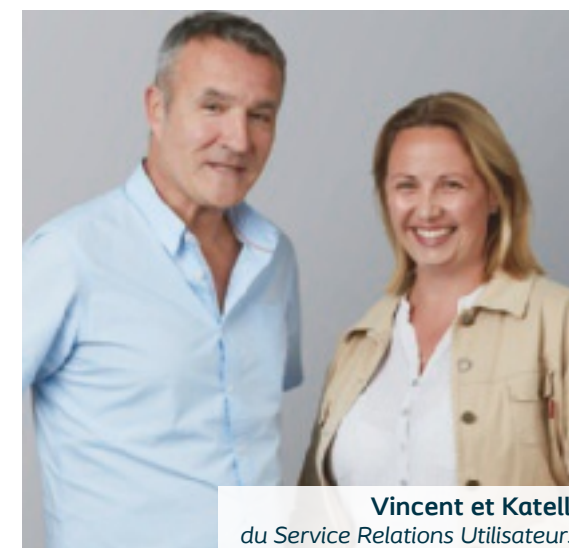

Vincent et Katell,
du Service Relations Utilisateurs

L'équipe de conseillers du Service Relations Utilisateurs est à l'écoute et disponible pour répondre à toutes les questions de vos patients sur leurs produits Coloplast.

Ils donneront aux utilisateurs les informations nécessaires pour utiliser au mieux leurs produits et les encourager à les intégrer dans leur quotidien.

Pour toutes les questions médicales, nous les inviterons à contacter leur professionnel de santé.



Une question ? Besoin d'aide ?

Nos conseillers sont à l'écoute de vos patients.

Pour toute question sur leur appareillage,
nous sommes à leur disposition

téléphone au : **0 800 01 58 68** Service & appel gratuits
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

e-mail à : FR_SRU@coloplast.com

ou connectez-vous sur : www.coloplast.fr

DOCUMENTATIONS – Patients

Il se peut que vos patients aient besoin d'aide et de conseils, en complément ou rappel de ceux donnés par les professionnels de santé, aussi bien avant qu'après l'intervention. Nous mettons à votre disposition des outils qui peuvent vous aider à la prise en charge de vos patients. Ces outils travaillés avec des professionnels de santé permettront également à vos patients à leur retour au domicile de retrouver les réponses à de nombreuses questions.

Documents éducatifs patients

Sondage Intermittent



1267C : Livret de sondage intermittent Femme



1268C : Livret de sondage intermittent Homme



1769C : Carnet Mictionnel

Etuis péniens et Poches



272E : Brochure prostatectomie*



2318E : Brochure d'autorééducation périnéale

Gamme Peristeen



2789P : Livret d'information Peristeen Plus Patient



2791P : Carnet de suivi Peristeen Plus




2792P : Carnet de suivi Peristeen Plus pédiatrique



2648E : Conseils utilisation Conveen, Folsyl & Folatex

Outils pour le quotidien du patient

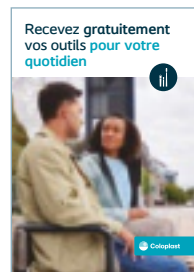

2863C : Brochure d'outils pour le quotidien - Sondage intermittent

Etuis péniens et Poches



1677E : Applicateur Conveen



2680E : Brochure outils au quotidien - Système Collecteur


MémoSonde™, pour vos patients souffrant de rétention urinaire

L'application gratuite **MémoSonde™** est conçue pour aider vos patients à prendre soin de leur vessie et à intégrer l'auto-sondage dans leur quotidien


Téléchargeable en scannant le **QR code** ou en se rendant sur le site info.coloplast.fr/memosonde




▼ Découvrez toutes les fonctionnalités

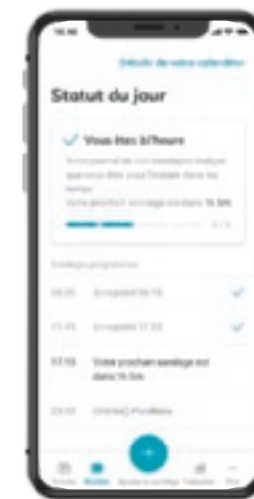

Routine de sondage et rappels
Inscription des recommandations du professionnel de santé et mise en place de rappels discrets afin d'établir une routine de sondage.

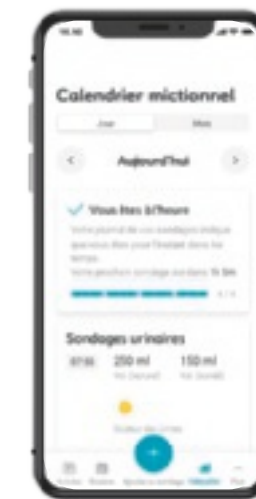

Calendrier mictionnel
Ce calendrier mictionnel digital est facilement accessible. Il est aussi possible de la partager avec un professionnel de santé si souhaité.

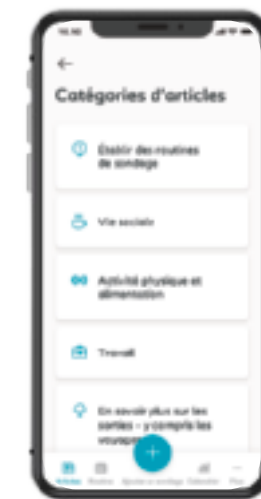




Articles écrits par des experts
L'application permet d'accéder à une bibliothèque d'articles personnalisés et de conseils inspirants.

Votre *partenaire* de confiance



En tant que partenaire de confiance, nous nous engageons à vous soutenir dans la prise en charge et l'accompagnement de vos patients, tout au long du parcours de soins. C'est pourquoi, nous avons développé une **offre de services exclusifs Coloplast® Professional** qui vous sont dédiés pour vous permettre d'accéder à des informations pertinentes, d'échanger et de partager votre expertise, afin d'optimiser la prise en charge de vos patients :

 <p>Supports d'informations Acquérir les fondamentaux dans une spécialité.</p>	 <p>Groupes de consultations Contribuer à la création de produits et services.</p>	 <p>Événements Coloplast S'inspirer, se rencontrer et échanger avec ses pairs.</p>	 <p>Projets de recherche Trouver de nouvelles façons d'élever le standard des soins.</p>
--	--	--	--

Ensemble, facilitons la vie des personnes souffrant de troubles médicaux intimes.

Plateforme web **ColoplastProfessional.fr**

Exclusivement dédiée aux professionnels de santé.

Consultez notre nouveau site web et accédez à des ressources fiables et actualisées :

Pour vous aider dans votre quotidien :

- Partages de bonnes pratiques et de trucs & astuces.
- Webinaires et vidéos d'experts.
- Preuves cliniques des produits Coloplast.

Pour encourager vos patients à adopter les bons réflexes :

- Vidéos de bon usage.
- Outils d'éducation.
- Questions-réponses les plus fréquentes.



Pour accéder à la plateforme web :



Scannez ce QR Code.



ou entrez l'URL ColoplastProfessional.fr dans votre navigateur.



Coloplast est à vos côtés



Les Responsables Régionaux Coloplast sont vos interlocuteurs privilégiés et répondent à vos besoins :

- Conseils sur l'utilisation des produits.
- Échantillons et documentations sur demande.


Le Service Clients Coloplast vous assiste du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 :

- Commandes de produits.
- Échantillons et documentations sur demande.
- Conseils techniques sur l'utilisation des produits.

Pour plus d'informations, contactez Coloplast :

Téléphone : 01 56 63 18 00 | Fax : 01 56 63 17 73

Votre relais de confiance en ville

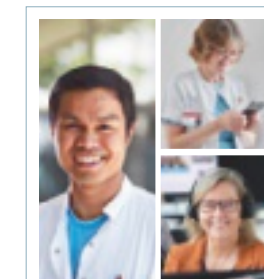

Coloplast® Professional Conseil

Votre partenaire de confiance en ville pour vous aider dans la prise en charge de vos patients

 Professional

Le Service Coloplast® Professional Conseil offre un accompagnement personnalisé aux professionnels de santé exerçant à la ville pour les aider dans la prise en charge de leurs patients, de retour à domicile :

- Formation à la bonne utilisation des produits.
- Échantillons et documentations sur demande.
- Conseils personnalisés quant à la délivrance des produits.

Les conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30, sans interruption :

par téléphone au : 01 56 63 18 88 - Choix 1

par e-mail à : conseil.pro@coloplast.com

Références

1. Détermination des forces de frottements sur les sondes urinaires conformément à la norme NF T 54-112, rapport numéro H060843, août 2007, test réalisé par un laboratoire indépendant. SpeediCath vs Actreen Glyc et Lofric Primo. SpeediCath a généré des forces de frottement d'en moyenne 0,16 N (ET= 0,02) vs forces de frottement moyennes avec Actreen Glyc 0,83 N(ET=0,05) et 0,25 N (ET=0,04) pour Lofric Primo.
2. Stensballe J *et al.* Eur Urol. 2005 Dec; 48(6): 978-83. Etude comparative, randomisée, en cross over, en simple aveugle. SpeediCath vs LoFric vs InCare Advance Plus. 40 hommes volontaires sains. Critère principal : Frictions sur l'urètre (Newton) mesurées par une procédure automatisée. Résultats : Frictions exercées sur l'urètre plus faibles avec SpeediCath (0.14N±0.003 vs 0.28±0.13 avec LoFric et 0.20±0.05 avec InCare Advance Plus ; p<0,05). Tolérance urétrale améliorée : L'évaluation subjective des sensations à l'insertion des sondes a montré une différence significative en faveur de SpeediCath.
3. De Ridder DJ *et al.* Eur Urol 2005;48:991-95. Etude comparative, randomisée, en 2 groupes parallèles. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 123 patients blessés médullaires suivis sur 12 mois. Critère principal : infection urinaire symptomatique. Résultats : réduction significative des infections urinaires avec SpeediCath (Aucune infection : 36% des patients vs 18% grpe sondes sèches ; p=0,02). 57/123 patients ont terminé l'étude. Principales raisons d'arrêt : reprise d'une fonction urinaire normale ou changement de mode mictionnel.
4. Chartier-Kastler E *et al.* Spinal Cord 2011, Jul;49(7):817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over. SpeediCath Compact Homme (SCCH) vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : Très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen : 1.59±2.24 avec SCCH vs 1.94±2.28. 95% IC: -1.49 à 0.80). Aucune douleur rapportée avec les deux sondes par 80% des patients (p=0.6). SCCH significativement plus facile à insérer (93.3% vs 73.3% ; p=0.002) et à contrôler (90% vs 60.6% ; p=0.002), plus discrète (90% vs 23%, p<0.0001) et plus facile à transporter, à stocker et à jeter (p<0.0001). 70% des patients ont préféré SpeediCath Compact Homme (p=0.03). SpeediCath Compact Homme a permis un sondage "no-touch" dans 93% des cas (vs 63% pour SpeediCath). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.
5. Leriche A *et al.* Rapport clinique avril 2005. Etude clinique comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath Compact Femme vs les sondes standards. 50 patientes. Critère principal : Préférence patient. Résultats : 76% des patientes ont préféré SC Compact (p<0.0001) à leur sonde, notamment pour sa facilité d'introduction (66%), facilité de retrait (46%) et sa discrétion (98%). Tolérance urétrale significativement améliorée avec SpeediCath Compact : 2 fois moins d'événements indésirables (douleurs, brûlures, saignements à l'insertion de la sonde).
6. Bagi P, *et al.* Urol Int 2011; 86: 179-84. Étude comparative de non-infériorité, randomisée, en crossover et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 26 hommes sains. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen: 2.25±1.5 avec Compact vs 2.52±1.8. 95% IC: -0.73 à 0.19). Même profil de tolérance urétrale avec les deux tsondes. SC Compact est plus facile à insérer (p=0.0001) et permet un hétérosondage no-touch dans 97.8% des cas (p<0.05). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.
7. Recommandations EAUN (European Association of Urology Nurses) 2013. Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. Intermittent Catheterisation in adults. Page 26 : "Les sondes compactes permettent le respect de la technique non-touch." Page 29 : «Oeils pouvant êtres polis pour plus de confort lors du sondage»
8. Domurath B *et al.* Spinal Cord 2011; 49(7): 817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : volume résiduel d'urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Les résultats montrent que la sonde SpeediCath Compact Homme est efficace pour vider la vessie (volume résiduel d'urine : 12.4±15.7 ml). Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane : 2,06 ml. 95% IC: -1.9, +7.7). 61% des hommes ont préféré SC Compact.
9. Biering-Sørensen *et al.* Scand J Urol Nephrol 2007; 41: 341-5. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Femme vs sondes standards. 24 femmes avec vessie neurogène. Critère principal : volume résiduel d'urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane: -12,5 ml. p=0.08). 96% des femmes étaient très satisfaites avec SC Compact.
10. Chartier-Kastler E *et al.* J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. Etude comparative, randomisée en cross over. SpeediCath Compact vs sondes standards. 125 patients (dont 15 femmes). Critère Principal : Qualité de vie, à l'aide du questionnaire ISC-Q (0: le Pire à 100 : le Meilleur). Amélioration significative du score ISC-Q avec SC Compact (76.8 vs 59.8 avec sondes standards ; p<0.001), notamment sur les domaines Commodité, Discrétion et Facilité d'utilisation, aussi bien chez les hommes (+16,9 points) que chez les femmes (+18,2). 63% des patients ont préféré SC Compact.
11. Enquête de satisfaction avec l'utilisation de SpeediCath Control réalisée auprès de 17 patients, mars 2009. Résultats : 70% des participants ont souhaité continuer à utiliser SpeediCath Control. 100% des participants l'ont noté Facile/Très facile à utiliser et 88% Facile/Très facile à contrôler durant le sondage; un sondage no-touch possible pour 69% des utilisateurs.
12. Pascoe G, *et al.* Br J Nurs 2001;10 (5):325-29. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs Lofric. 27 patients. Critère principal : Préférence. 76% des utilisateurs ont préféré SpeediCath à Lofric, notamment en termes de praticité (88%) et vitesse du sondage (68%) (p<0.0015).
13. Van Kuppevelt *et al.* ISCoS, 2004 Septembre, Athens, Greece. Page : 216. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs Lofric vs EasiCath. 72 patients inclus. Critère principal : facilité d'utilisation sur une échelle de 0 (très difficile) à 10 (très facile). Résultats : SpeediCath a été jugée significativement plus facile à utiliser que les sondes Lofric et EasiCath (7.8 vs 6.9 et 6.7 respectivement ; p=0.003).
14. Cardenas D *et al.* PM&R May 2011;3:408-17. Étude randomisée, en 2 groupes parallèles, avec un suivi de 6 mois. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 224 patients blessés médullaires récents (<3 mois) sous autosondages depuis < 10 jours. Critère principal : délai de survenue des infections urinaires symptomatiques (IUS). Résultats : L'apparition d'une IUS traités par antibiotiques est significativement retardée dans le groupe SpeediCath (p=0,038), avec une réduction de 33% du risque quotidien de développer une IUS (odds-ratio=0.666, IC 95% : 0.453-0.978) et une réduction de 21 % du taux d'IUS nosocomiale (p<0,05). Satisfaction globale des patients supérieure dans le groupe SpeediCath (p=0,007).
15. Leriche *et al.* Prog Urol. 2006 Jun;16(3):347-51. 29 patients sur 31 inclus. Etude comparative, prospective, multicentrique randomisée, en cross-over et en ouvert. SpeediCath Set vs Actreen Set. L'analyse a porté sur 29 hommes pratiquant l'autosondage. SpeediCath Set a démontré sa supériorité contre Actreen Set en termes de facilité d'introduction (p=0,0065), facilité de vidange (p=0,0157), qualité du librifant (p<0,0001), tolérance urétrale et performance du sondage au lit (p=0,0157).
16. Enquête internationale de satisfaction sur l'utilisation de SpeediCath Compact Set, réalisée auprès de 1044 patients sous sondage intermittent dont 638 hommes, février 2015. Chaque patient a testé 30 produits. 88% ont noté SpeediCath Compact Set facile à utiliser, 88% facile à ouvrir.
17. Test d'utilisation - Speedicath Flex Set (VV- 0323892), réalisé chez 16 patients, Février 2021.
18. Enquête internationale de satisfaction sur l'utilisation de SpeediCath Compact Set, réalisée auprès de 70 professionnels de santé, août 2013. 99% des participants pensent qu'il est facile de former les patients avec SpeediCath Compact Set.
19. Verification Laboratory Report SpeediCath Compact Eve, 2014: Page 5. Le test "Fermeture sécurisée après utilisation" consistait à ouvrir et refermer la sonde en essuyant les gouttes, l'agiter et la placer dans un filtre charbon pendant 1 minute et observer les fuites. 14 sondes testées. Résultats : aucune fuite observée.
20. Lubrification hydrophile brevetée
21. Cindolo L *et al.* Urol Int 2004;73:19-22. Etude randomisée, en 2 groupes parallèles, en simple aveugle à l'insu du patient. EasiCath Luer Lock vs sondes traditionnelles enduites de gel de lidocaïne ou néomycine ou fluocinolone. 100 patients recevant une immuno ou chimiothérapie intravésicale pour cancer de la vessie. Critère principal : infection urinaire définie par bactériurie>105 UFC/ml avec leucocyturie sur l'ECBU réalisé 2 jours après chaque sondage. Résultat : réduction significative des infections urinaires sous EasiCath (détectée pour 7,4 % (34/470) des sondages avec les sondes traditionnelles contre 3,5 % (17/482) des sondages avec EasiCath ; p<0,01). L'inconfort urétral lors du sondage significativement réduit avec EasiCath (1.3±0.1 vs 2.1±0.2 sur une échelle de 0 (aucun inconfort) à 5 (inconfort maximal) ; p<0,001). Aucune orchite-épididymite ou hématurie observée.
22. Pariente JL, Conort P. Biomateriaux utilisés au contact de la voie excrétrice pour le drainage des urines : Sondes et Endoprothèses urétrales. Progrès en Urologie 2005; 15 897-906. Le Latex est toxique par lui-même et les additifs chimiques toxiques, associés aux cathéters au cours des processus de fabrication, sont relargables et extractibles, malgré une enduction de la sonde par un autre matériau. (page 894).
23. Se reporter à la notice d'utilisation du produit
24. Chartier-Kastler E *et al.* BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude randomisée, en cross over. Etais péniens Conveen® Optima + poches Conveen® vs les protections absorbantes. 58 hommes incontinents urinaires. Critère principal: Qualité de vie. Résultats : Qualité de vie significativement améliorée sur 2 domaines du KHQ : «limitation des activités quotidiennes» (p=0,01) et «impact de l'incontinence» (p=0,045). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour les étuis péniens Conveen® Optima pour : efficacité, sentiment de sécurité, estime de soi, maîtrise des odeurs, respect de l'état cutané, sentiment de liberté et discrétion (p<0.05).

Références (suite)

25. Le déploiement de la bientraitance. Guide à destination des professionnels en établissements de santé et EHPAD. Groupe bientraitance FORAP-HAS. Mai 2012. «Mettre tout en oeuvre pour respecter l'intégrité physique et psychique, la dignité et l'intimité de l'utilisateur».
26. Christensen P et al. Etude randomisée, contrôlée, irrigations transanales vs le traitement conservateur du dysfonctionnement intestinal chez les blessés médullaires. *Gastroenterology* 2006;131:738-47. 87 patients, 81 analysés. Critère Principal : évolution des symptômes de constipation et d'incontinence fécale. Résultats : Les patients traités avec l'irrigation transanale avaient moins de plaintes de constipation et d'incontinence fécale, avec une amélioration de leur qualité de vie, et un temps réduit passé sur les procédures de gestion de l'intestin. Score constipation Cleveland (0 à 30 ; 30 sévère) 10,3 vs 13,2 (p=0,0016) ; score incontinence St-Mark (0-24 ; 24 sévère) 5,0 vs 7,3 (p=0,015). 73,8% étaient partiellement ou totalement dépendant d'une tierce personne; 15/36 patients (41,6%) ont rapporté une réduction de leur dépendance avec Peristeen vs 2/44 (4,5%) dans le groupe contrôle (p= 0,0001) + Taux d'infections urinaires symptomatiques avec Peristeen nécessitant une antibiothérapie : 5,9% vs 15,5% (p= 0,0052). Temps passé sur les toilettes noté 30,8±19,4 vs 49,1±48,2 (p=0,094). 4 événements indésirables ont été signalés dans le groupe ITA, aucun cas sévère, 2 cas non liés au dispositif (1 distension abdominale aiguë et 1 escarre sacré) et 2 cas de douleurs abdominales sévères se résolvant après désimpaction fécale après 3 et 9 semaines de traitement. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.
27. Meurette et al. Low anterior resection syndrome after rectal resection management: multicentre randomized clinical trial of transanal irrigation with a dedicated device (cone catheter) versus conservative bowel management, *BJS*, 2023, 1-4, znad078, N=30 Etude randomisée multicentrique, suivi de 12 semaines incluant 32 patients, 30 analysés à distance à 3 mois minimum de remise en continuité de la stomie et présentant un score LARS majeur (au moins 30) traité par Peristeen sonde rectale conique vs traitement conservateur - critère principal : amélioration du score LARS à 3 mois (0 à 42 - 30 sévère) 21,3 vs 32,2 (p=0,008). Temps consacré à l'exonération et aux épisodes d'incontinence par jour (minutes), moyenne sur 3 mois, 32,8 min vs 68,1 min (p<0,001). Visites aux toilettes par jour, moyenne sur 3 mois, 1,4 vs 3,8 (p<0,001). Visites aux toilettes par nuit, moyenne sur 3 mois, 0,29 vs 1,14 (p<0,001). Etude réalisée sur une version antérieure de Peristeen Plus Sonde rectale conique, Coloplast a documenté l'équivalence en termes de performances et sécurité des 2 produits.
28. Christensen P et al. Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence and constipation. *Dis Colon Rectum* 2003; 46: 68-76. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.
29. SpeediCath Flex evaluation study, Poster présenté au congrès de l'ISCoS (International Spinal Cord Society), oct 2017, Dublin, P248, Etude prospective «avant-après» en 2 parties, Partie 1 : Critère principal : évaluation du succès de l'insertion des sondes SpeediCath Flex dès le 1er sondage. Participants : 58 hommes pratiquant l'autosondage avec des sondes hydrophiles droites avec gaine. Résultats : 100% des patients ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Partie 2 : Critère principal: évaluation du succès de l'insertion des sondes SpeediCath Flex dès le 1er essai dans les anatomies difficiles. Participants: 95 hommes pratiquant l'autosondage avec des sondes béquillées (Tiemann), principalement pour grosse prostate (36%), rétrécissement urétral (26%) ou fausse route (12%). Résultats : 86% d'entre eux ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Et sur les 87 patients qui l'ont utilisé pendant une semaine, 62% ont jugé Facile/Très Facile la navigation de la sonde dans l'urètre et 71% l'ont noté «douce à l'insertion».
30. EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins : Sondage urétral. Section 2, Sondage intermittent. 4.3.1 Embouts / Extrémité flexible et arrondie ; Page 17 : «La sonde urétrale idéale a une extrémité flexible qui permet le passage dans presque tous les urètres, quelle que soit leur configuration ou leur degré d'obstruction. Certaines sondes disposent d'extrémités spécialement arrondies destinées à prévenir les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l'urètre.»
31. Flex II: Verification Laboratory Report - DIO 4.5 touchable and dry sleeve, Doc. No: VV-0232486. Objectif : valider que la gaine est sèche et hermétique (test de bulle). 34 produits testés. Succès : 100%.
32. Emmanuel AV. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Review article. *Spinal Cord*. 2013 Oct;51(10):732-8. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.

Dans le cadre de leurs activités commerciales, les Laboratoires Coloplast SAS (6, rue de Rome, 93561 Rosny-sous-Bois cedex) (« Coloplast »), collectent et traitent les données personnelles des professionnels de santé. Ces données sont traitées pour les finalités suivantes :

- La gestion des activités marketing et promotionnelles (y compris l'envoi de communications) ;
- La gestion des inscriptions aux sessions d'information sur les produits Coloplast ;
- La gestion des demandes d'échantillons de produits ;
- La gestion des prises de rendez-vous avec les équipes commerciales de Coloplast ;
- La gestion des contrats et conventions (y inclus leur signature et leur exécution, les paiements associés, la gestion de l'archivage, et les formalités auprès des Autorités compétentes) ;
- Répondre aux exigences légales et réglementaires applicables (en particulier les obligations relatives à la transparence, la lutte contre la corruption, l'inspection fiscale des comptes).

Pour en savoir plus sur la manière dont Coloplast, responsable du traitement de données, gère vos données personnelles et comment vous pouvez exercer vos droits, veuillez consulter, notre note d'information sur la protection des données personnelles sur <https://pro.coloplast.fr/global/rgpd/> ainsi que notre Politique mondiale de gestion des données à caractère personnel sur <https://www.coloplast.com/global/privacy-notice/privacy-notice---french/>

Vous pouvez demander à ne pas ou à ne plus recevoir de communications marketing et promotionnelles à tout moment et sans frais.

Pour toute question, veuillez contacter privacyrequests@coloplast.com ou contacter votre représentant local de Coloplast. Trouvez votre représentant local de Coloplast ici : <https://www.coloplast.com/global/contact-us/>

L'histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark.

Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d'être opérée d'une colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que sa stomie ne fuit en public. Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la première poche de stomie adhésive au monde. Une poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd'hui, notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie, la continence et les soins des plaies. Nous continuons de suivre l'exemple d'Elise : nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie des personnes souffrant d'altérations physiques intimes.

Folysil : dispositifs médicaux de classe IIb, marqués CE (2460).

Conveen® Optima, Peristeen Plus, Gamme Brava, Conveen® Prep, poche SpeediCath Compact, poches à urines Conveen (hors Triform) et accessoires : dispositifs médicaux de classe I non stériles, marqués CE. SpeediCath, EasiCath, Conveen® Triform : dispositifs médicaux de classe I, stériles, marqués CE (2460).

Conveen® Protact est un produit cosmétique

Fabricant : Coloplast A/S.

Folatex : dispositif médical de classe IIb, stérile, marqué CE (0123).

Fabricant : Well Lead Medical Co., Ltd

Lire attentivement la notice d'instructions des produits avant utilisation.

www.autoreeducation-perineale.fr

Un guide en ligne pour aider vos patients à pratiquer leurs exercices d'autorééducation périnéale. Un test leur permettra de suivre leurs progrès.

Coloplast partenaire du
DIU d'Infirmière experte en Urologie



Association
Française
d'Urologie
www.urofrance.org



Association
Française des
Infirmières et
Infirmiers en
Urologie

Document réservé à l'usage de professionnels de santé.

Soins des stomies | Continence | Soins des plaies | Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast, SAS : Société par actions simplifiée
Siège social : Le Move - 38 rue Roger Salengro - 94120 Fontenay-sous-Bois - France
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS CRETEIL : 312 328 362
SIREN : 312 328 362 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 247Z - PM-18413 - Février 2024 - PS



 **Coloplast**