


Peristeen® Plus : découvrez les nouveautés !

Pourquoi avons-nous changé le système Peristeen ?

A partir de vos retours d'expérience de professionnels de santé et d'utilisateurs, nous avons fait évoluer notre dispositif d'irrigation transanale sur ses côtés pratiques tout en conservant son efficacité¹.

Il fonctionne de la même manière que le système Peristeen que vous connaissez.

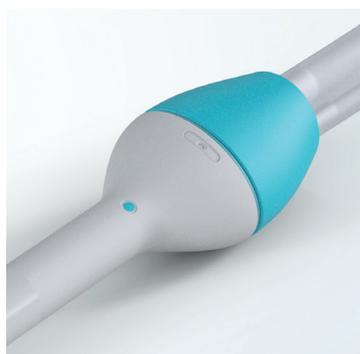

+ 3 nouveaux connecteurs

- Plus faciles à manipuler²
- Code couleur conservé :
 - Le connecteur gris à connecter au bouchon à vis gris
 - Les connecteurs turquoises à connecter à l'unité de contrôle et à la sonde à ballonnet

+ Unité de contrôle améliorée

- Symboles²
 - Plus faciles à comprendre
 - Plus faciles à distinguer
- Nouveau bouton manuel de l'unité de contrôle²
 - Meilleure prise en main
 - Plus facile à tourner

+ Indicateur de température

- Pour une température d'eau adéquate avant l'irrigation
 - Effectuez l'irrigation lorsque l'indicateur est vert ●

Peristeen® Plus

A prendre en considération

- + Peristeen® Plus est une version améliorée du système Peristeen.
- + La sécurité et l'efficacité des deux systèmes sont équivalentes¹.
- + Les sondes à ballonnet de Peristeen Plus ont les mêmes dimensions que celles de Peristeen.
La longueur de la sonde introduite dans le rectum est :
 - Taille standard : 95 mm
 - Taille courte : 80 mm

Comme indiqué dans la notice d'utilisation, la sonde à ballonnet doit être insérée dans le rectum en laissant la zone de préhension hors du corps.

- + Les sondes à ballonnet Peristeen Plus ne peuvent pas être utilisées avec un système d'irrigation transanale Peristeen, et inversement.

Codes produit

Peristeen*

* Progressivement les références Peristeen seront remplacées par les références Peristeen Plus



Codes produit

Peristeen Plus



Références	Description	Contenu	Références	Description	Contenu
291210	Système	1 unité de contrôle 2 sondes rectales standard 1 poche à eau (avec bouchon à vis) 2 attaches 1 tubulure	291410	Système Peristeen Plus Taille standard	1 unité de contrôle 2 sondes à ballonnet Taille standard 1 poche à eau (avec bouchon à vis) 2 attaches (1 sachet) 1 tubulure
291220	Unité d'accessoire	15 sondes rectales standard 1 poche à eau	291420	Unité d'accessoire Peristeen Plus Taille standard	15 sondes à ballonnet Taille standard 1 poche à eau (sans bouchon à vis)
291260*	Système	1 unité de contrôle 2 sondes rectales de petit diamètre 1 poche à eau (avec bouchon à vis) 2 attaches 1 tubulure	291480	Système Peristeen Plus Taille courte	1 unité de contrôle 2 sondes à ballonnet Taille courte 1 poche à eau (avec bouchon à vis) 2 attaches (1 sachet) 1 tubulure
291270	Unité d'accessoire	15 sondes rectales courtes 1 poche à eau	291490	Unité d'accessoire Peristeen Plus Taille courte	15 sondes à ballonnet Taille courte 1 poche à eau (sans bouchon à vis)
291250	Tubulure	2 tubulures avec des connecteurs bleus	291460	Tubulures Peristeen Plus	2 tubulures avec connecteur bleu turquoise

1. Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M et al. Randomized, Controlled Trial of Transanal Irrigation Versus Conservative Bowel Management in Spinal Cord -Injured Patients. Gastroenterology 2006;131:738 -747. Cette étude porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.

2. Summative usability test report - Peristeen Plus (VV- VV-0314800), Décembre 2020. Test d'utilisation réalisé par 30 patients et 30 professionnels de santé/aide soignants. Les participants ont été formés à l'utilisation de Peristeen Plus et Peristeen (produit déjà commercialisé). 77% des répondants ont estimé que la sonde rectale à ballonnet Peristeen® Plus est plus facile à connecter et à déconnecter. 65% que le connecteur gris de la tubulure est plus facile à connecter et à déconnecter à la poche à eau. 68% que le connecteur de la tubulure est plus facile à connecter et à déconnecter à l'unité de contrôle. 87% des répondants estiment que les symboles de l'unité de contrôle sont plus intuitifs, 88% qu'ils sont plus faciles à comprendre, 92% qu'ils sont plus explicites et 83 % qu'ils sont plus faciles à distinguer. 68% des répondants estiment que le bouton de l'unité de contrôle permet une meilleure prise en main. 65% que le bouton de l'unité de contrôle est plus facile à tourner et 88 % qu'elle a été améliorée.

Peristeen Plus : Dispositif médical destiné à faciliter l'évacuation du contenu de la partie inférieure et descendante du colon, de classe I, non stérile, marqué CE.
Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Complications : La perforation intestinale est une complication extrêmement rare, mais grave et potentiellement mortelle de l'irrigation transanale, qui nécessite une hospitalisation d'urgence et, souvent, une intervention chirurgicale. Le patient doit consulter immédiatement un médecin si, pendant ou après la procédure d'irrigation transanale Peristeen, il présente l'un des symptômes suivants : • Douleur abdominale ou dorsale sévère ou prolongée, notamment si elle est associée à de la fièvre • Saignement anal sévère ou prolongé.

Intégralement remboursé dans l'indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire. La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastro-entérologue, soit par un chirurgien viscéral ou pédiatrique, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. L'irrigation transanale pourra être effectuée tous les deux ou trois jours, à l'issue d'une phase d'initiation. Les traitements de première intention pourront être poursuivis. Peristeen Plus doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l'utilisation de ce dispositif, notamment à l'auto-sondage. L'implication d'infirmières formées à la technique ou de stomathérapeutes est recommandée pour l'apprentissage de la technique et peut être nécessaire lors de sa poursuite.